

# Karta Thopaz<sup>+</sup>™ Quick Card




Tato karta Quick Card nenahrazuje návod k použití REF 200.6842 a odkazuje na firmware 1.01



## 1. Sestavení



1. Otevřete obal sterilní hadice.
2. Ponechte konektor pacienta ve vnitřním sáčku.

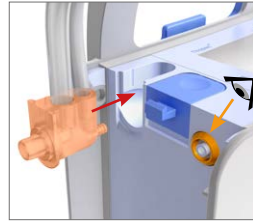

3. Zkontrolujte přítomnost oranžového těsnění.
4. Připojte hadici.

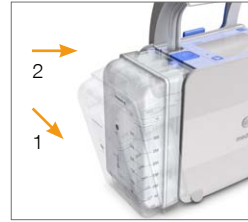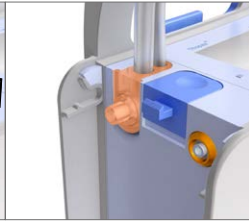


5. Zasuňte nejprve spodní část nádoby.
6. Zacvakněte nádobu.




7. Systém Thopaz<sup>+</sup> je připojen a připraven pro zapnutí.

## 2. Zapnout

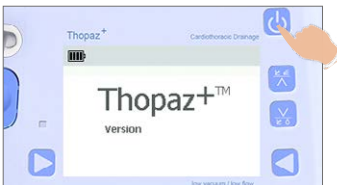


1. Zapněte systém Thopaz<sup>+</sup>.
2. Potvrďte, zda je nebo není připojen nový pacient.

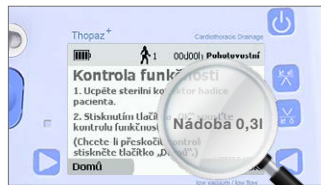


3. Zkontrolujte detekovanou velikost nádoby (Detekce špatné nádoby: Nádobu vyhodte).
4. Systém Thopaz<sup>+</sup> je připraven pro kontrolu funkce.


## 3. Provedte kontrolu funkce.

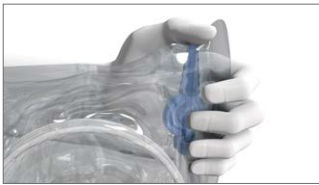

1. Utěsněte hadici (uchovávejte ji sterilní).

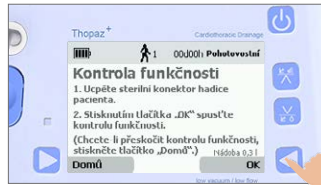

2. Stiskněte „OK“.  
**Test úspěšný:** Pokračujte  
**Test neúspěšný:** Dodržujte postup v návodu k použití REF 200.6842.

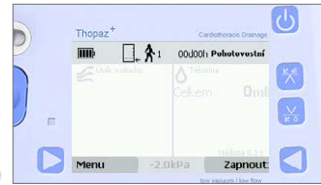

3. Připojte systém Thopaz<sup>+</sup> k pacientovi dle předpisů zdravotnického zařízení.
4. Zahajte terapii stisknutím tlačítka „On“ (Zapnout).

## 4. Upravte tlak během provozu.



1. Stiskněte současně.



2. Nastavte požadovaný tlak.



3. Potvrďte tlačítkem „OK“.

## 5. Zkontrolujte průběh terapie.



1. Zkontrolujte historii úniku vzduchu.



2. Posuňte se pomocí tlačítka „Next“ (Další) přes grafy úniku vzduchu.




3. Zkontrolujte historii úniku.




4. Posuňte se pomocí tlačítka „Next“ (Další) přes grafy tekutin.

## 6. Vynulování zobrazení tekutiny.

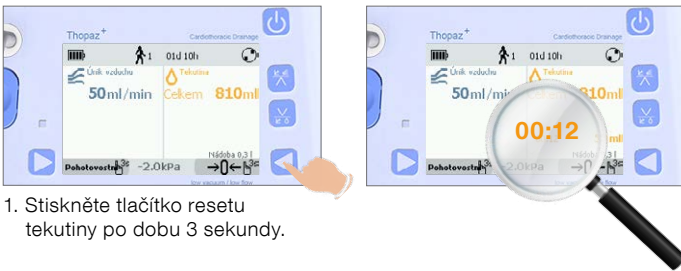


1. Stiskněte tlačítko resetu tekutiny po dobu 3 sekundy.
2. Časovač ukazuje, kdy byl parametr naposledy upraven na nula. Displej je možné kdykoliv dle potřeby upravit na nula opětovným stisknutím tlačítka historie tekutiny na dobu 3 sekundy.

## 7. Vyměňte nádobu.

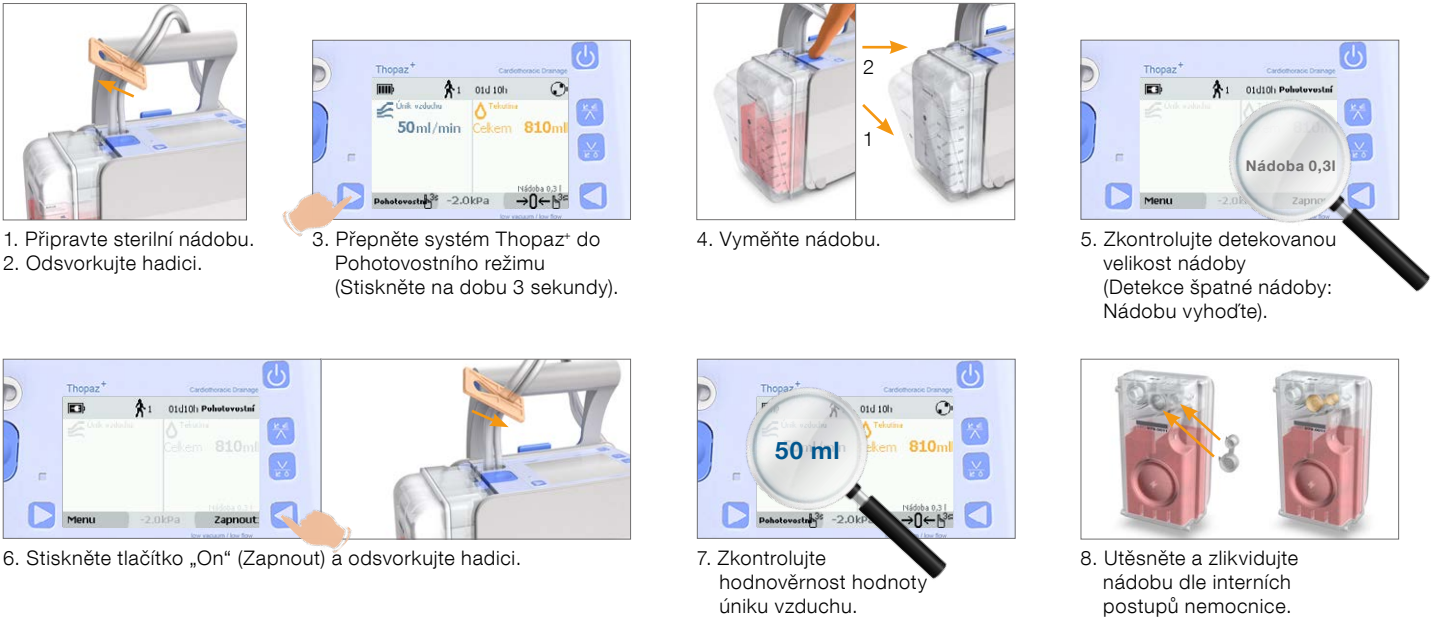

1. Připravte sterilní nádobu.
2. Odsvorkujte hadici.
3. Přepněte systém Thopaz+ do Pohotovostního režimu (Stiskněte na dobu 3 sekundy).
4. Vyměňte nádobu.
5. Zkontrolujte detekovanou velikost nádoby (Detekce špatné nádoby: Nádobu vyhodte).
6. Stiskněte tlačítko „On“ (Zapnout) a odsvorkujte hadici.
7. Zkontrolujte hodnověrnost hodnoty úniku vzduchu.
8. Utěsněte a zlikvidujte nádobu dle interních postupů nemocnice.

## 8. Alarmy

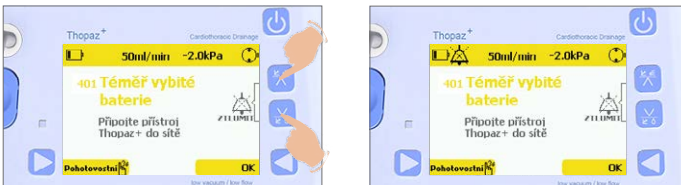

1. Stiskněte současně pro ztišení akustického alarmu.
2. Postupujte dle pokynů na obrazovce.


## 10. Vypněte systém Thopaz+.



1. Odsvorkujte katétr.
2. Odsvorkujte hadici.
3. Přepněte systém Thopaz+ do Pohotovostního režimu (Stiskněte na dobu 3 sekundy).
4. Vypněte systém Thopaz+.
5. Vyjměte a utěsněte nádobu.
6. Vyhodte nádobu a hadici dle interních předpisů nemocnice.
7. Očistěte a desinfikujte systém Thopaz+ dle návodu k použití REF 200.0681 (Obecné pokyny k čištění).

## 9. Kontrola katétru

Používejte pouze s katérem pacienta (drénem) v interpleurálním prostoru.

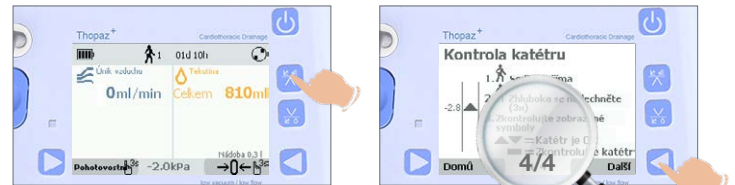

1. Přejděte na historii úniku vzduchu.  
**Poznámka:** Kontrola katétru je aktivní pouze při úniku vzduchu 0 ml/min.
2. Přejděte na stránku 4/4 stisknutím tlačítka „Next“ (Další).
3. Postupujte podle pokynů na displeji.

