

Kompletní systém pro vakuovou extrakci

OBLAST POUŽITÍ

Gynekologie – porodní sály

Šetrná pro matku i dítě

BEZPEČNÁ A JEMNÁ POMOC

- nezbytné a přesné vakuum během několika vteřin
- pístový odsávací systém
- menší kolísání vakua díky zásobníku

KOMPLETNÍ ŘADA PŘÍSLUŠENSTVÍ

- vakuum extraktory jednorázové nebo pro opakované použití
- možnost použití nožního regulátoru vakua

VÝHODY

- maximálně bezpečná pro matku a dítě
- tichý provoz bez vibrací
- dlouhá životnost
- bezúdržbový provoz



SPECIFIKACE

- efektivní sací výkon: min. 30 l/min.
- min. průtok 25 l/min., max. průtok 35 l/min.
- podtlak: - 90 kPa, tolerance +/- 15%
- pístový odsávací systém pro rychlý nástup vakua
- nízkootáčkový sací systém: 70 ot./min.
- hlučnost jen 38,5 dB
- maximálně tichý chod bez vibrací
- možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání – 24 hodin i více
- bezúdržbový provoz – bezmazný systém
- membránový bezpečnostní regulátor pro přesné nastavení vakua
- třístupňová ochrana proti přesátí
- světelná indikace chodu
- barevně značený manometr
- možnost kontroly provozních hodin bezkontaktním snímačem (využití při servisních kontrolách)
- možnost pojízdné verze, připojení nožního regulátoru vakua
- antistatická verze

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- pojistná nádoba s víčkem proti přesátí, polysulfonová, autoklávovatelná
- propojovací silikonová hadice se 2 spojkami pro rychlé a bezpečné odpojení hadic z lahví – vše autoklávovatelné
- pacientská odsávací hadice 1,8 m - silikonová autoklávovatelná

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- pojízdný stojan s antistatickými kolečky
- nožní regulátor vakua
- 1. Varianta: Příslušenství pro sání do jednorázových odsávacích vaků
- 2. Varianta: Příslušenství pro sání do autoklávovatelné láhve
- vakuum extraktory jednorázové nebo pro opakované použití

ZÁRUKA

5 let na agregát

VEX AUTOKLÁVOVATELNÝ - SILIKON




Silc Cup

Silc Cup - Trumpet

Caesar Cup

VEX JEDNORÁZOVÝ - PLAST

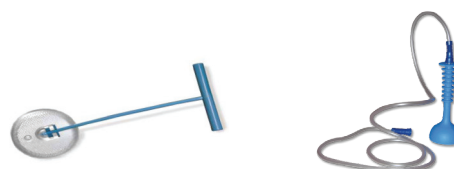

Bird Cup

Silc Cup

TECHNICKÁ DATA

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Klasifikační třída | IIa |
| Hmotnost a rozměr přenosné verze | 9,3 kg, 210 × 305 × 375mm |
| Hmotnost a rozměr pojízdné verze | 16 kg, 965 × 510 × 480 mm |
| Příkon | 220–240 V, 50 Hz |
| Výkon | 110 W |
| Sací systém – pístový | 70 ot./min |



DN FORMED
BRNO s.r.o.

Více než jen prodej ...

DN FORMED Brno s.r.o. • Hudcova 76a, 612 48 Brno
tel.: +420 532 198 888 • fax: +420 532 198 889
www.dnformed.cz • dnformed@dnformed.cz