

## Svítidlo operační a zákrovkové - LED



Duo 10/10 C



10 C



10 W





10 F

Přednostní svítidla IRIS je nejen moderní LED technologie, ale také možnost nastavení intenzity osvětlení na 100 % max. výkonu nebo jen na 60 %, které zajišťuje ekonomický a praktický provoz. Svítidlo lze tedy použít jak k operačním/ zákrokovým výkonům tak pro standardní vyšetření pacientů.

- špičková švýcarská kvalita
- moderní LED osvětlovací technologie
- nastavitelná světelná intenzita osvětlení na 60% nebo 100%
- vysoká světelná intenzita beze stínů, odlesku a oslnění
- téměř žádné infračervené záření (bez tepelného sálání)
- úhel otočení hlavy svítidla 270°
- všechny klouby jsou fixovány balančním systémem
- snímatelný držák, sterilizovatelný
- uchycení na strop s možností volitelné délky vertikálního úchytu 30, 50, 70, 90 nebo 110 – nutno uvést při objednání svítidla (v obj. čísle označení posledních 5 číslic)
- volitelné: adaptér do stropního podhledu

TECHNICKÁ DATA	
žárovka	1x LED modul se 7 LED žárovkami, životnost žárovky: 40.000 hod.
světel. výkon	50 000 lux / 1,0 m Duo - 2x 50 000 lux / 1,0 m
světelné pole	ø 17 cm
intenzita osvětlení	60/100 %
teplota chromatičnosti	4300 K
index podání barev	CRI (Ra) > 95
příkon	220-240 V; 50/60 Hz
výkon	16 W, Duo - 32 W
hmotnost	10/10 C - 22 kg, 10 C - 14 kg, 10 W - 14 kg, 10 F - 16 kg
materiál	hliník, PC & ABS (tělo svítidla)
vypínač	2 stupeňový přepínač (60/100 %), vypínač (I/O)
třída bezpečnosti	I
normy	EN 60601-1, EN 60601-2-41
speciální vlastnosti	sterilizovatelný držák
upevnění	10/10 C, 10 C - stropní, 10 W - nástěnné, 10 F - pojízdné
délka ramene	10 C, 10 W - 120 cm 10 F - 64 cm, V stojanu 157 cm
volitelné	u stropní verze adaptér do stropního podhledu, možnost délky vertikálního úchytu 30-110 cm - nutno uvést v objednávce

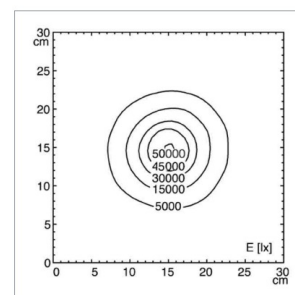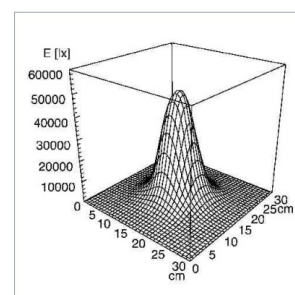

svítivost

## OBJEDNACÍ KÓDY

OBJ. Č.	NÁZEV ZBOŽÍ
ND15.612.000	Svítidlo IRIS LED duo 10/10 C stropní, 2ramenné - operační/zákrokové
ND15.611.000	Svítidlo IRIS LED 10 C stropní, 1ramenné - operační/zákrokové
ND15.613.000	Svítidlo IRIS LED 10 W nástěnné, 1ramenné - operační/zákrokové
ND15.615.000	Svítidlo IRIS LED 10 F pojízdné, 1ramenné - operační/zákrokové