

Visiano LED

Derungs 
MEDICAL LIGHTING

Svítlidlo vyšetřovací, intenzivní péče - LED



20-2 CT1



20-2 PTX





20-2 PTX
+ stojan pojízdný
ND15.595.000

Předností vyšetřovacího svítidla Visiano je energetická úspora a vysoký světelný výkon díky moderní LED technologii. Je vhodné pro všeobecné lékařství, neonatologii, gynekologii, dermatologii, plastickou chirurgii.

- špičková švýcarská kvalita
- moderní LED osvětlovací technologie - 16 LED diod
- 365 jemných vyvýšenin kolem diod poskytuje optimální míchání barev světla
- 4 stupně nastavení intenzity osvětlení
- vysoká světelná intenzita beze stínů, odlesku a oslnění
- téměř žádné infračervené záření (bez tepelného sálání)
- úhel otočení hlavy svítidla 360°
- dotykový ovládací panel na hlavici svítidla
- transparentní kryt LED diod - abrazi odolný
- antibakteriální: hlava svítidla, ovládací panel a klouby jsou vyrobeny z antimikrobiálního hygienického materiálu Sanitized®. Tato antimikrobiální dezinfikující hygienická ochranná složka je integrována od hlavy lampy již během výroby. Inhibuje růst a množení mikrobů a bakterií, zatímco ionty stříbra destabilizují buněčnou membránu. Tím je zabráněno růstu bakterií.
- klouby fixovány balančním systémem
- verze stropní nebo uchycení pomocí speciálních držáků na eurolištu, stůl, zeď, pojízdný stojan
- volitelné – síťová šňůra 3 m nebo 5 m
- uchycení na strop s možností úpravy délky vertikálního úchytu na max. 116 cm
- volitelné: adaptér do stropního podhledu

TECHNICKÁ DATA	
žárovka	Modul 16x LED, životnost žárovky: 40.000 hod.
světél. výkon	60 000 lux / 0,5 m
světelné pole fokusace	Ø 21 cm
intenzita osvětlení	4 stupně 10 - 100 %
teplota chromatičnosti	3500 K / 4500 K
příkon	100-240 V, 50/60 Hz
výkon	21 W
hmotnost	20-2 CT1 - 9 kg 20-2 P TX - 2 kg
Index podávání barev	CRI (Ra) > 95
materiál	hliník, PC & ABS (tělo svítidla)
vypínač	dotykový panel na hlavici svítidla
třída bezpečnosti	II
normy	EN 60601-1, EN 60601-2-41
upevnění - trn Ø 16 mm	stropní verze nebo volitelně na eurolištu, stůl, zeď, pojízdný stojan
délka ramene	108 cm
volitelné	u stropní verze adaptér do stropního podhledu, možnost délky vertikálního úchytu max. 116 cm - nutno uvést v objednávce

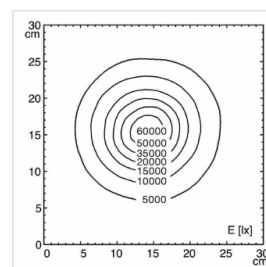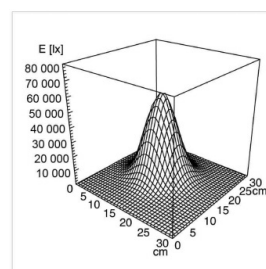

svítivost (6 cm)

OBJEDNACÍ KÓDY

OBJ. Č.	NÁZEV ZBOŽÍ
ND15.450.000	Svítidlo VISIANO LED 20-2 C T1 stropní, 1 ramenné - vyšetřovací
ND15.451.000	Svítidlo VISIANO LED 20-2 P TX upevnění volitelné - vyšetřovací