




**DN FORMED
BRNO S.R.O.**

Basic

Spolehlivé odsávání s důrazem na hygienu

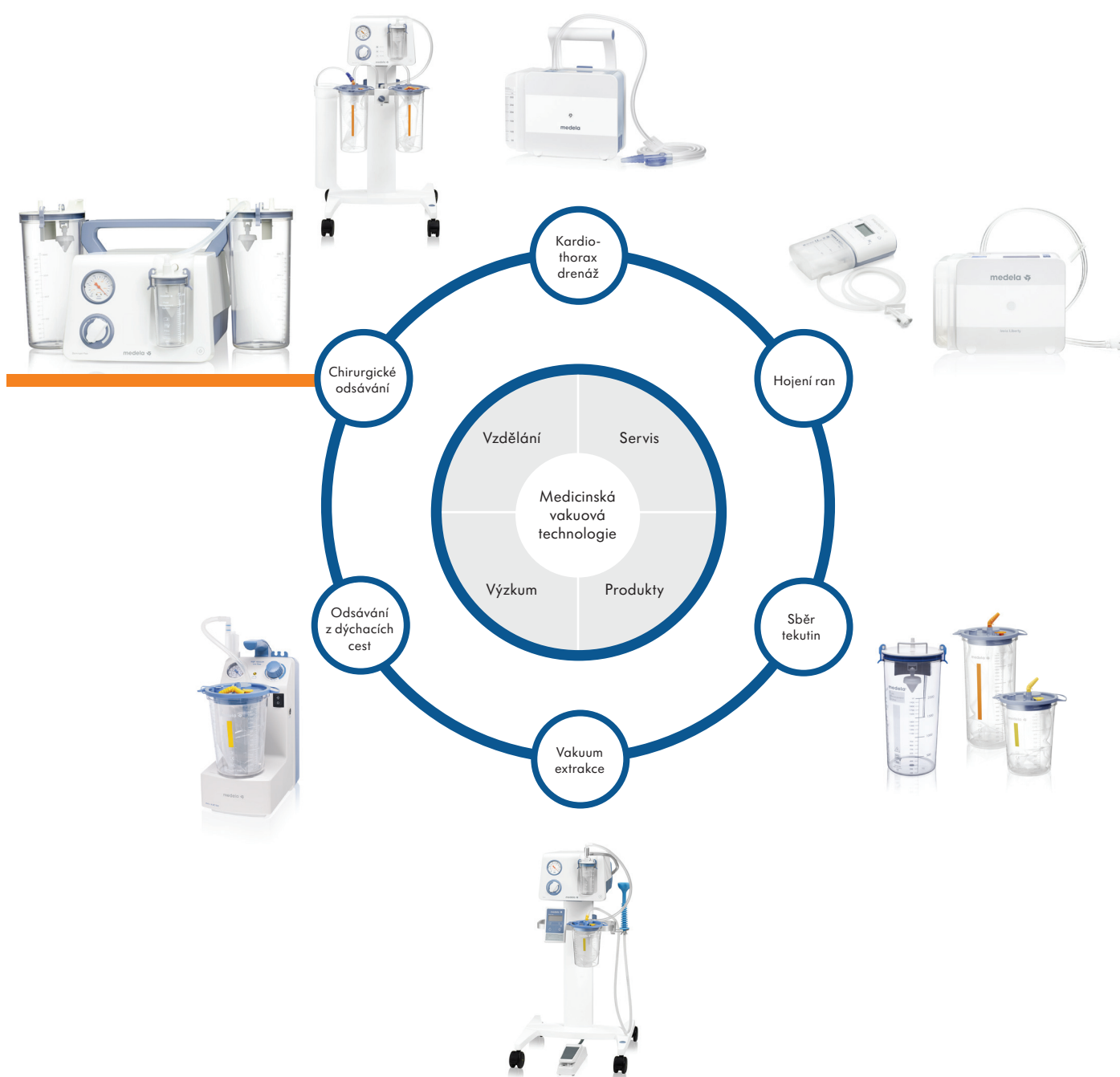

medela

Basic

Výkonná a tichá

Vysoký výkon odsávání díky spolehlivé pístové technologii.

Oblast použití

Vhodná pro odsávání tělních tekutin. Využití na ARO, JIP, lůžková odd., operační sály, ORL, urologii, endoskopii, gastroenterologii, gynekologii, vakuum extrakce, ORL, neonatologii, pediatrii, dentální kliniky a čelistní chirurgie, pohotovost, privátní lékařské praxe, LDN.

Basic odbourává hygienické problémy díky jednodílnému krytu a dotykovému tlačítku **CleanTouch ON/ OFF**, které současně zkracují dobu čištění.

Pomalý chod pohonné jednotky zajišťuje **velmi tichý provoz**. Zjednodušená vnitřní konstrukce odsávačky Basic minimalizuje úsilí potřebné pro rutinní kontroly a šetří náklady na provoz a údržbu.



Přenosná verze
bez madla



Přenosná verze
s madlem



Pojízdná verze

RYCHLÁ FAKTA

- pístový systém pro rychlé vytvoření vakua během několika vteřin
- membránový regulátor vakua pro přesný sací výkon
- hygienický koncept: jednodílný kryt, dotykové tlačítko CleanTouch ON/OFF
- vhodná pro každý typ endoskopického systému
- spolehlivý nepřetržitý provoz
- výkonná a velmi tichá
- dlouhá životnost
- přenosná nebo pojízdná verze
- doporučeno použití virových filtrů Medela

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Podtlak	-90 kPa / - 675 mmHg
	Průtok	30 l/min.
	Přenosná verze Pojízdná verze	9,3 kg 16 kg
	VxŠxH	210x305x375 mm (přenosná verze) 965x510x480 mm (pojízdná verze)
	Záruka	5 let
	Příkon	220 - 240 V, 50 Hz
	Výkon	50 W
	ZP	IIa

SPECIFIKACE

- pístový odsávací systém s velmi rychlým nástupem vakua
- průtok: 30 l/min
- podtlak: - 90 kPa
- hlučnost: jen 36,3 dB
- nízkootáčkový sací systém
- hygienický koncept: jednoduchý kryt, dotykové tlačítko ON/OFF
- možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání – 24 hodin i více
- bezúdržbový provoz, bezmazný systém, bezolejová převodovka
- membránový bezpečnostní regulátor pro přesné nastavení vakua
- třístupňová ochrana proti přesátí
- integrovaný držák pro 2 láhve
- světelná indikace chodu
- barevně značený manometr
- spolehlivý chod bez vibrací
- madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem
- možnost připojení nožního spínače ON/OFF nebo nožního regulátoru vakua
- možnost připojení na vozík s eurolíštou a brzděnými antistatickými kolečky

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	OBJEDNACÍ ČÍSLO		ZÁRUKA
• 1x láhev pojistná 0,25l proti přesátí, PS, autoklávovatelná • 1x víčko pro láhev pojistnou, PS, autoklávovatelné • 1x hadice propojovací silikonová 7/12, autoklávovatelná, 60 cm • 2x spojka propojovací přímá, autoklávovatelná • 1x síťový kabel • 1x hadice patientská silikonová 7/12, autoklávovatelná, 180 cm	N071.0000	MEDELA Basic s madlem	5 let
	N071.0001	MEDELA Basic bez madla (vhodný do endo věží)	5 let

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	N077.0741	Vozík s eurolíštou Kolečka antistatická, 2 brzděná a 2 bez brzdy.
	N077.0521	Držák láhve na eurolíštu, plastový Držák slouží pro uchycení všech typů lahví Medela na eurolíštu.
	NB011600003	Zásobník katetrů, nerezový VxŠxH: 500x100x100 mm
	N077.0563	Přepínač vakua Přepínač vakua slouží k manuálnímu přepnutí odsávání do jedné nebo druhé láhve. Délka hadice: 30 cm
	N077.0751 N077.0752	Držák hadice na eurolíštu – levý Držák hadice na eurolíštu – pravý Celonerezový držák je určen pro bezpečné uchycení/odložení odsávací patientské hadice.
	N077.0747	Držák síťové šňůry / nožního spínače na eurolíštu Držák je určen k bezpečnému uchycení síťové šňůry nebo nožního spínače ON/OFF odsávaček Medela. Lze jej zavěsit přímo na eurolíštu vozíku, na kterém je odsávačka umístěna.
	N077.0743	Košík k vozíku odsávaček
Sběrný systém	Možnost výběru mezi jednorázovým systémem (Medela vaky) nebo systémem pro opakovatelné použití (autoklávovatelné láhve).	

Podrobný přehled příslušenství - viz kompletní katalog Medela.

Výrobce:

Medela AG

Lättichstrasse 4b
6341 Baar / Switzerland

Distributor a servisní středisko:

DN FORMED Brno s.r.o.

Hudcova 76a
612 00 Brno
Telefon: 770 144 113
E-mail: chirurgie@dnformed.cz
www.dnformed.cz

