


Dominant Flex

Multifunkční odsávačka s proměnnými průtoky

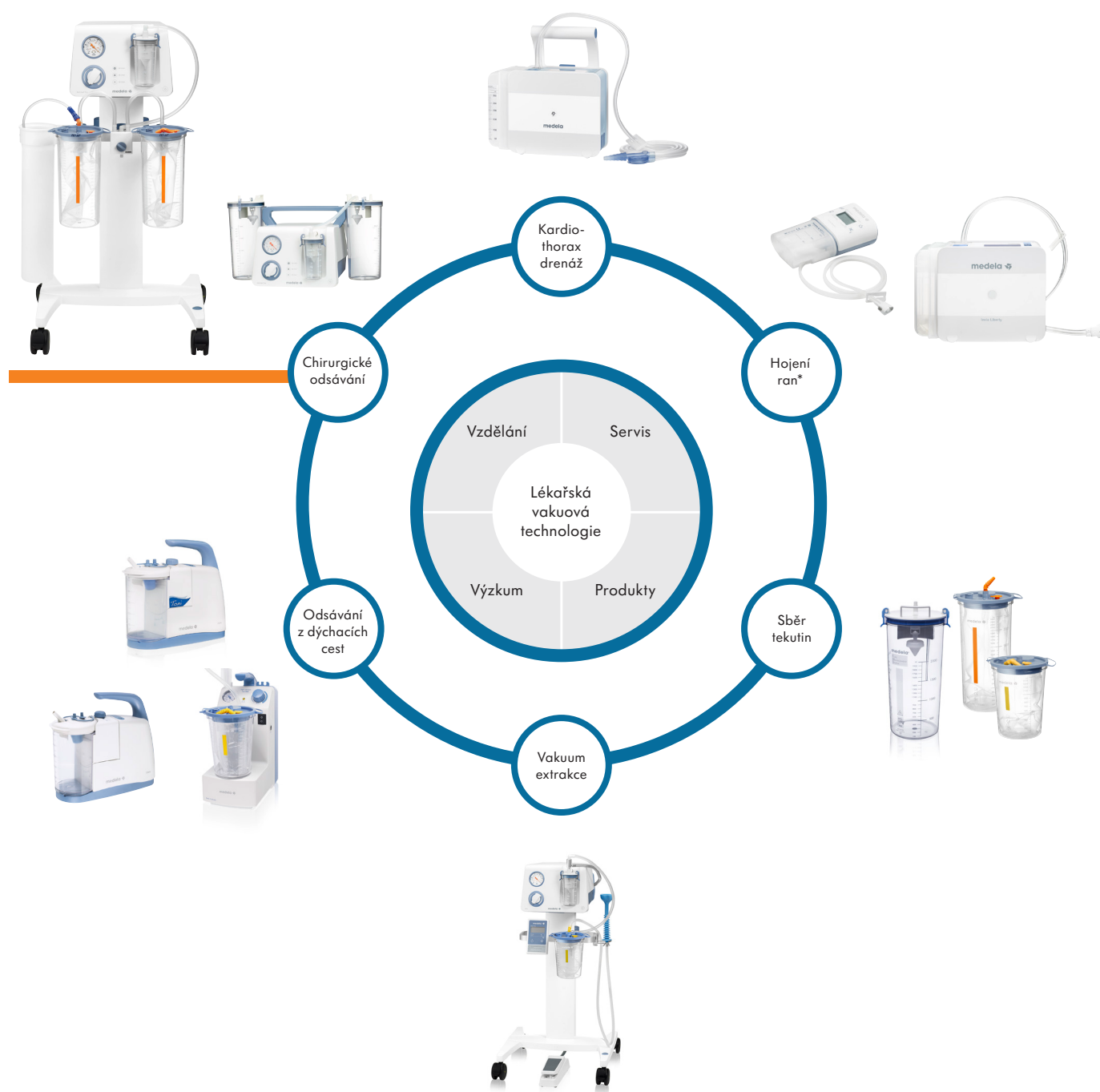

Dominant Flex

Multifunkční odsávačka

Dominant Flex lze použít pro spolehlivé výkonné odsávání tělních tekutin. Nabízí **vyjimečné nastavení tří průtoků** 40 l/min., 50 l/min. nebo 60 l/min.

Oblast použití

Vhodná pro zákroky, které vyžadují proměnné průtoky: OP sály, chirurgie, neurochirurgie, ortopedie, traumatologie, ORL, endoskopie, porodní sály, plastické chirurgie - liposukce.

Dominant Flex odbourává hygienické problémy díky jednoduchému krytu a dotykovému tlačítku **CleanTouch ON/ OFF**, které současně zkracují dobu čištění.

Pomalý chod pohonné jednotky zajišťuje **velmi tichý provoz**. Zjednodušená vnitřní konstrukce odsávačky Dominant Flex minimalizuje úsilí potřebné pro rutinní kontroly a šetří náklady.

Další ochranu je možné zajistit použitím virových nebo bakteriálních filtrů.



Přenosná verze



Pojízdná verze

RYCHLÁ FAKTA

- univerzální multifunkční odsávačka pro více aplikací
- volba průtoků 40 / 50 / 60 l/min.
- pístový systém pro rychlé vytvoření vakua během několika vteřin
- membránový regulátor vakua pro přesný sací výkon
- hygienický koncept: jednoduchý kryt, dotykové tlačítko CleanTouch ON/OFF
- vhodná pro endoskopické systémy
- spolehlivý nepřetržitý provoz
- výkonná a velmi tichá
- dlouhá životnost
- přenosná nebo pojízdná verze
- doporučeno použití virových filtrů Medela



Podtlak

-95 kPa

-713 mmHg



Průtok

40/50/60 l/min. (± 5 l/min.)



Přenosná verze
Pojízdná verze

9,3 kg
16 kg



VxŠxH

210x305x375 mm (přenosná verze)
965x510x480 mm (pojízdná verze)



Záruka

5 let



Příkon

220 - 240 V, 50 Hz

Výkon

50 W



ZP

IIa

SPECIFIKACE

- pístový odsávací systém s velmi rychlým nástupem vakua
- proměnné průtoky 40 / 50 / 60 l/min.
- podtlak: - 95 kPa
- hlučnost: 37,8 / 38,4 / 39,8 dB
- 3 tlačítka One-Touch pro požadovaný průtok
- nízkootáčkový sací systém
- hygienický systém: jednodílný kryt, dotykové tlačítko ON/OFF
- možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání
- bezúdržbový provoz, bezmazný systém, bezolejová převodovka
- membránový bezpečnostní regulátor pro přesné nastavení vakua
- třístupňová ochrana proti přesátí
- světelná indikace chodu
- barevně značený manometr
- spolehlivý chod bez vibrací
- možnost připojení nožního spínače ON/OFF nebo nožního regulátoru vakua
- možnost připojení na vozík s eurolíštou a brzděnými antistatickými kolečky

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 1x láhev pojistná 0,25l proti přesátí, PS, autoklávovatelná
- 1x víčko pro láhev pojistnou, PS, autoklávovatelné
- 1x hadice propojovací silikonová 7/12, autoklávovatelná, délka 60 cm
- 2x spojka propojovací přímá, autoklávovatelná
- 1x síťový kabel
- 1x hadice patientská silikonová 7/12, autoklávovatelná, 180 cm

OBJEDNACÍ ČÍSLO

N071.0003 MEDELA Dominant Flex

ZÁRUKA

5 let

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



N077.0741

Vozík s eurolíštou

Kolečka antistatická, 2 brzděná a 2 bez brzdy.



N077.0521

Držák láhve na eurolíštu, plastový

Držák slouží pro uchycení všech typů lahví Medela na eurolíštu.



N077.0563

Přepínač vakua

Přepínač vakua slouží k manuálnímu přepnutí odsávání do jedné nebo druhé láhve.
Délka hadice: 30 cm



N077.0723

Spínač nožní ON/OFF

Délka kabelu: 3,5 m



N077.0751
N077.0752

Držák hadice na eurolíštu – levý Držák hadice na eurolíštu – pravý

Celonerezový držák je určen pro bezpečné uchycení/odložení odsávací patientské hadice



N077.0747

Držák síťové šňůry / nožního spínače na eurolíštu

Držák je určen k bezpečnému uchycení síťové šňůry nebo nožního spínače ON/OFF odsávaček Medela. Lze jej zavěsit přímo na eurolíštu vozíku, na kterém je odsávačka umístěna.

Sběrný systém

Možnost výběru mezi jednorázovým systémem (Medela vaky) nebo systémem pro opakovatelné použití (autoklávovatelné láhve).

Podrobný přehled příslušenství - viz strana 30 - 34.

Výrobce:

Medela AG

Lättichstrasse 4b
6341 Baar / Switzerland

Distributor a servisní středisko:

DN FORMED Brno s.r.o.

Hudcova 76a
612 00 Brno
Telefon: 770 144 113
E-mail: chirurgie@dnformed.cz
www.dnformed.cz

