

Dominant Flex

Multifunkční odsávačka

Dominant Flex lze použít pro spolehlivé výkonné odsávání tělních tekutin. Nabízí **vyjimečné nastavení tří průtoků** 40 l/min., 50 l/min. nebo 60 l/min.

Oblast použití

Vhodná pro zákroky, které vyžadují proměnné průtoky: OP sály, chirurgie, neurochirurgie, ortopedie, traumatologie, ORL, endoskopie, porodní sály, plastické chirurgie - liposukce.

Dominant Flex odbourává hygienické problémy díky jednoduchému krytu a dotykovému tlačítku **CleanTouch ON/ OFF**, které současně zkracují dobu čištění.

Pomalý chod pohonné jednotky zajišťuje **velmi tichý provoz**. Zjednodušená vnitřní konstrukce odsávačky Dominant Flex minimalizuje úsilí potřebné pro rutinní kontroly a šetří náklady.

Další ochranu je možné zajistit použitím virových nebo bakteriálních filtrů.



Přenosná verze

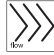

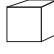



Pojízdná verze

RYCHLÁ FAKTA

- univerzální multifunkční odsávačka pro více aplikací
- volba průtoku 40 / 50 / 60 l/min.
- pístový systém pro rychlé vytvoření vakua během několika vteřin
- membránový regulátor vakua pro přesný sací výkon
- hygienický koncept: jednoduchý kryt, dotykové tlačítko CleanTouch ON/OFF
- vhodná pro endoskopické systémy
- spolehlivý nepřetržitý provoz
- výkonná a velmi tichá
- dlouhá životnost
- přenosná nebo pojízdná verze
- doporučeno použití virových filtrů Medela

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Podtlak	-95 kPa	-713 mmHg
	Průtok	40/50/60 l/min. (± 5 l/min.)	
	Přenosná verze	9,3 kg	
	Pojízdná verze	16 kg	
	VxŠxH	210x305x375 mm (přenosná verze) 965x510x480 mm (pojízdná verze)	
	Záruka	5 let	
	Příkon	220 - 240 V, 50 Hz	
	Výkon	50 W	
	ZP	IIa	

SPECIFIKACE

- pístový odsávací systém s velmi rychlým nástupem vakua
- proměnné průtoky 40 / 50 / 60 l/min.
- podtlak: - 95 kPa
- hlučnost: 37,8 / 38,4 / 39,8 dB
- 3 tlačítka One-Touch pro požadovaný průtok
- nízkootáčkový sací systém
- hygienický systém: jednodílný kryt, dotykové tlačítko ON/OFF
- možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání
- bezúdržbový provoz, bezmazný systém, bezolejová převodovka
- membránový bezpečnostní regulátor pro přesné nastavení vakua
- třístupňová ochrana proti přesátí
- světelná indikace chodu
- barevně značený manometr
- spolehlivý chod bez vibrací
- možnost připojení nožního spínače ON/OFF nebo nožního regulátoru vakua
- možnost připojení na vozík s eurolištu a brzděnými antistatickými kolečky

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 1x láhev pojistná 0,25l proti přesátí, PS, autoklávovatelná
- 1x víčko pro láhev pojistnou, PS, autoklávovatelné
- 1x hadice propojovací silikonová 7/12, autoklávovatelná, délka 60 cm
- 2x spojka propojovací přímá, autoklávovatelná
- 1x síťový kabel
- 1x hadice patientská silikonová 7/12, autoklávovatelná, 180 cm







OBJEDNACÍ ČÍSLO

N071.0003 MEDELA Dominant Flex

ZÁRUKA

5 let

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	N077.0741	Vozík s eurolištu Kolečka antistatická, 2 brzděná a 2 bez brzdy.
	N077.0521	Držák láhve na eurolištu, plastový Držák slouží pro uchycení všech typů lahví Medela na eurolištu.
	N077.0563	Přepínač vakua Přepínač vakua slouží k manuálnímu přepnutí odsávání do jedné nebo druhé láhve. Délka hadice: 30 cm
	N077.0723	Spínač nožní ON/OFF Délka kabelu: 3.5 m
	N077.0751 N077.0752	Držák hadice na eurolištu – levý Držák hadice na eurolištu – pravý Celonerezový držák je určen pro bezpečné uchycení/odložení odsávací patientské hadice
	N077.0747	Držák síťové šňůry / nožního spínače na eurolištu Držák je určen k bezpečnému uchycení síťové šňůry nebo nožního spínače ON/OFF odsávaček Medela. Lze jej zavěsit přímo na eurolištu vozíku, na kterém je odsávačka umístěna.
Sběrný systém	Možnost výběru mezi jednorázovým systémem (Medela vaky) nebo systémem pro opakovatelné použití (autoklávovatelné láhve).	

Podrobný přehled příslušenství - viz strana 30 - 34.