


Sběrný systém

Maximální hygiena - ochrana personálu i pacienta

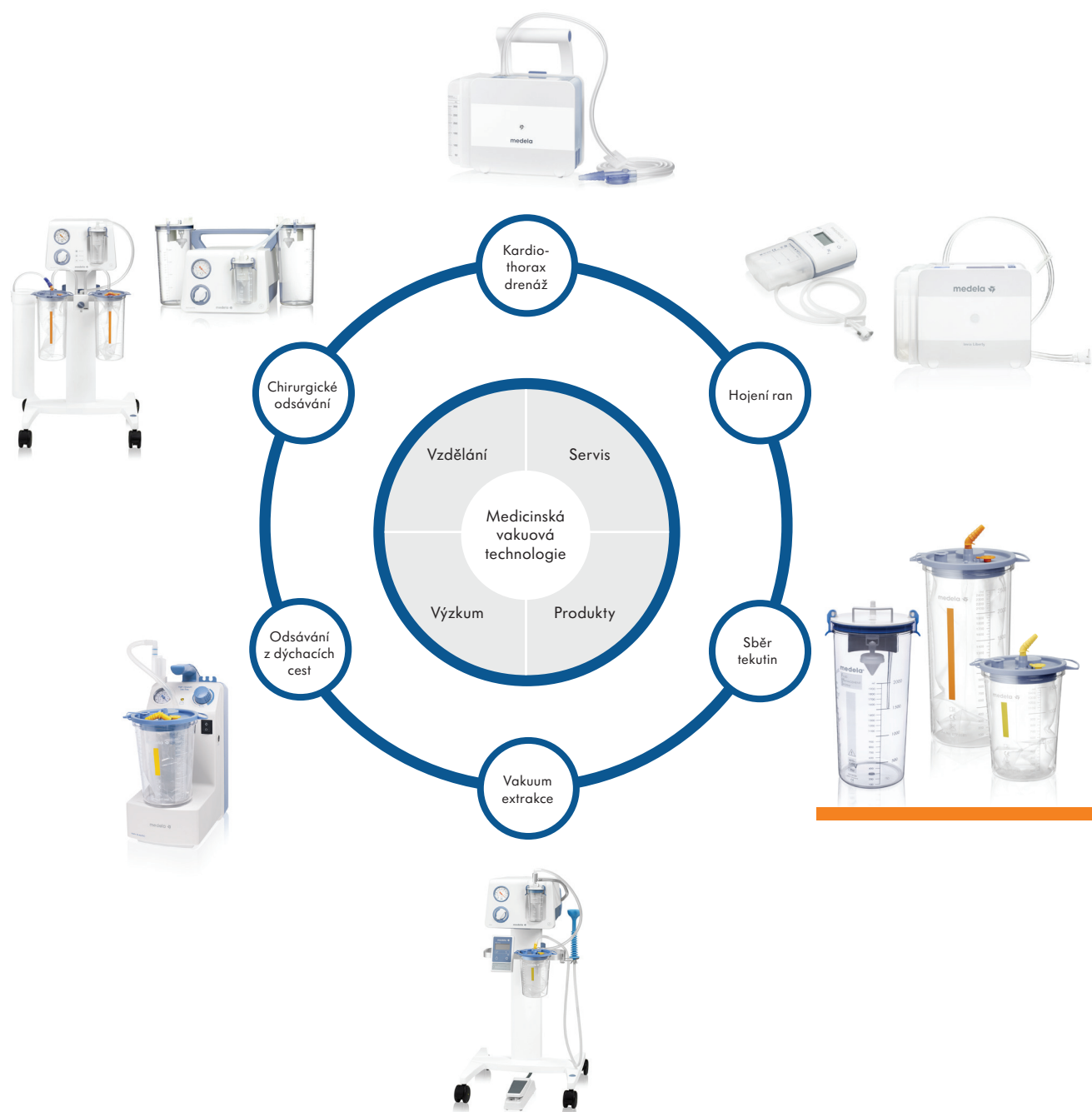

Jednorázový sběrný systém

Maximální hygiena - ochrana personálu i pacienta

Jednorázový sběrný systém splňuje dvě základní potřeby – jednoduchou manipulaci a vysokou hygienickou bezpečnost.

Jednoduchá manipulace

- zřetelné barevné rozlišení objemu vaků i lahví zabraňuje jejich možné záměně
- pojistná spona fixuje láhev v držáku - při vyjmutí vaku zůstává láhev bezpečně uchycena v držáku
- vakuový vstup v integrovaném držáku láhve umožňuje, aby během výměny vaku zůstala vakuová hadice stále propojena
- úhlová spojka patientské hadice o průměru až 11 mm
- umožňuje odsátí velkých částic a zabraňuje zalomení hadice
- dva úchyty na vaku umožňují snadnou obsluhu pravou nebo levou rukou
- polykarbonátovou láhev lze desinfikovat až na 100 °C
- vaky s krystalizátorem nebo bez něj (krystalizátor způsobuje ztuhnutí sekretu)
- láhve lze propojit do série pomocí konektorů nebo přepínače vakua
- flexibilní - možnost dodání vaku s PVC odsávací hadicí, přerušovačem sání - FingerTipem nebo stop ventilem

Vysoká bezpečnost

- možnost použití vaku u jednoho pacienta až 4 dny (ekonomická úspora)
- dvouvrstvý vak zajišťuje maximální pevnost a zabraňuje prostupování zápachu
- materiál Polyamid/Polyethylen
- skladovatelnost 3 roky od data výroby uvedeného na obalu/krabici i víčku vaku
- barva značení: 1,5 l systém – žlutá, 2,5 l systém – oranžová
- bez krystalizátoru nebo s krystalizátorem

RYCHLÁ FAKTA

- Bezpečný, hygienický sběr a likvidace tekutin
- Snadná manipulace, ovládání jednou rukou
- Integrovaný bakteriální filtr a předfiltr s vysokým průtokem a přepadem
- Vysoce odolné dvouvrstvé vaky odolné proti prasknutí
- **Doporučeno použití virových filtrů Medela.**



MEDELA VAK OBSAHUJE

- víčko
- patientský vstup s úhlovou spojkou a ucpávkou
- vstup pro sériové propojení a ucpávku
- 2 úchyty
- ochranný kryt proti přesátí
- zpětný ventil s navigací kapaliny zabráňující zpětnému toku sekretu a snižující pění
- filtrační komoru
- předfiltr, který zabráňuje průchodu kouře a částic aerosolu do filtru
- bakteriální a hydrofobní filtr s lapačem nečistot

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	N077.0082 (1.5l) N077.0085 (2.5l)	Láhev pro Medela vaky Opakovaně použitelná Vyrobeno z nerozbitného a snadno čistitelného polykarbonátu Objem: 1,5 a 2,5l	
	N077.0083 (1.5l) N077.0086 (2.5l)	Medela vaky Objem: 1,5 a 2,5 l	
	N077.0084 (1.5l) N077.0087 (2.5l)	Medela vak se stužovadlem Objem: 1,5l a 2,5l	
	N077.0095	Konektor vakuový pro sériové propojení Medela vaků, autoklávatelný Silikónový Délka: 25 cm Průměr: Ø 7 x 12 mm	
	N077.0158	Konektor patientský pro sériové propojení Medela vaků, jednorázový Délka: 34 cm Průměr: Ø 8 x 12 mm	
	N077.0094	Nádobka pro odběr vzorků na Medela vak, jednorázová Určena pro odběr vzorků při odsávání Balení: 10 ks	

Podrobný přehled příslušenství - viz kompletní katalog Medela.

Výrobce:

Medela AG

Lättichstrasse 4b
6341 Baar / Switzerland

Distributor a servisní středisko:

DN FORMED Brno s.r.o.

Hudcova 76a
612 00 Brno
Telefon: 770 144 113
E-mail: chirurgie@dnformed.cz
www.dnformed.cz

