

Profesionální odsávací systémy



Katalog

medela 



Drahocenný život, progresivní péče

Medela AG je výrobce zdravotnických odsávacích systémů, které mají velkou důvěru u lékařů a zdravotníků na celém světě.

Cílem společnosti Medela AG je neustálé zlepšování péče o pacienty, zjednodušení práce lékařů a nemocničního personálu.

Tyto výzvy nás trvale vedou k inovacím našich produktů. Život je drahocenný a k tomu, aby zdravotníci mohli poskytovat progresivní péči, potřebujeme skvělé pracovníky, jako jsou lidé v Medele.

Medela Healthcare poskytuje průkopnická řešení pro odsávání dýchacích cest, chirurgické odsávání, vakuovou extrakci, sběrný systém, hrudní odsávání a podtlakovou terapii (NPBT).

Michael Larsson
předseda představenstva Medela AG

Výzkum

Medela má dlouhou historii podpory lékařského výzkumu prostřednictvím partnerství s předními lékaři, výzkumníky, nemocnicemi a výzkumnými ústavami. Tato spolupráce nám umožňuje získávat nejnovější znalosti, které nám pomáhají při vývoji nových a inovativních přístrojů.

Cílem společnosti Medela je být odborníky v příslušných oblastech zdravotní péče na základě důkladného a klinického výzkumu. Medela aplikuje znalosti, oživuje výzkum a snaží se zlepšit budoucnost péče o pacienty.

Servis

Naše vyškolené zákaznické a technické servisní týmy se snaží poskytovat cennou podporu pro splnění vašich potřeb, technické dotazy, běžnou údržbu, podporu produktů nebo dotazy týkající se objednávek a dodávek. Naše servisní týmy jsou tu, když je potřebujete k podpoře vaší klinické praxe.

Vzdělávání

Medela se zavázala k neustálému vzdělávání a je přesvědčena, že vzdělávání a odborná příprava jsou klíčem k zajištění úspěchu a kvality péče o pacienty.

Máme 30 let zkušeností se zdravotnickými odsávacími technologiemi Medela.

Nejnovější technologie

Precizní, odolná a spolehlivá

Nejdůležitějšími vlastnostmi odsávaček Medela jsou pohonný systém a regulátor vakua. Zatímco pohonná jednotka zajišťuje rychlé a spolehlivé vytvoření vakua, regulátor zaručuje jeho správnou hodnotu. Zejména u těchto komponentů je důležitá absolutní spolehlivost a funkčnost ve všech situacích. Proto Medela spoléhá na vlastní vývoj všech klíčových komponentů.

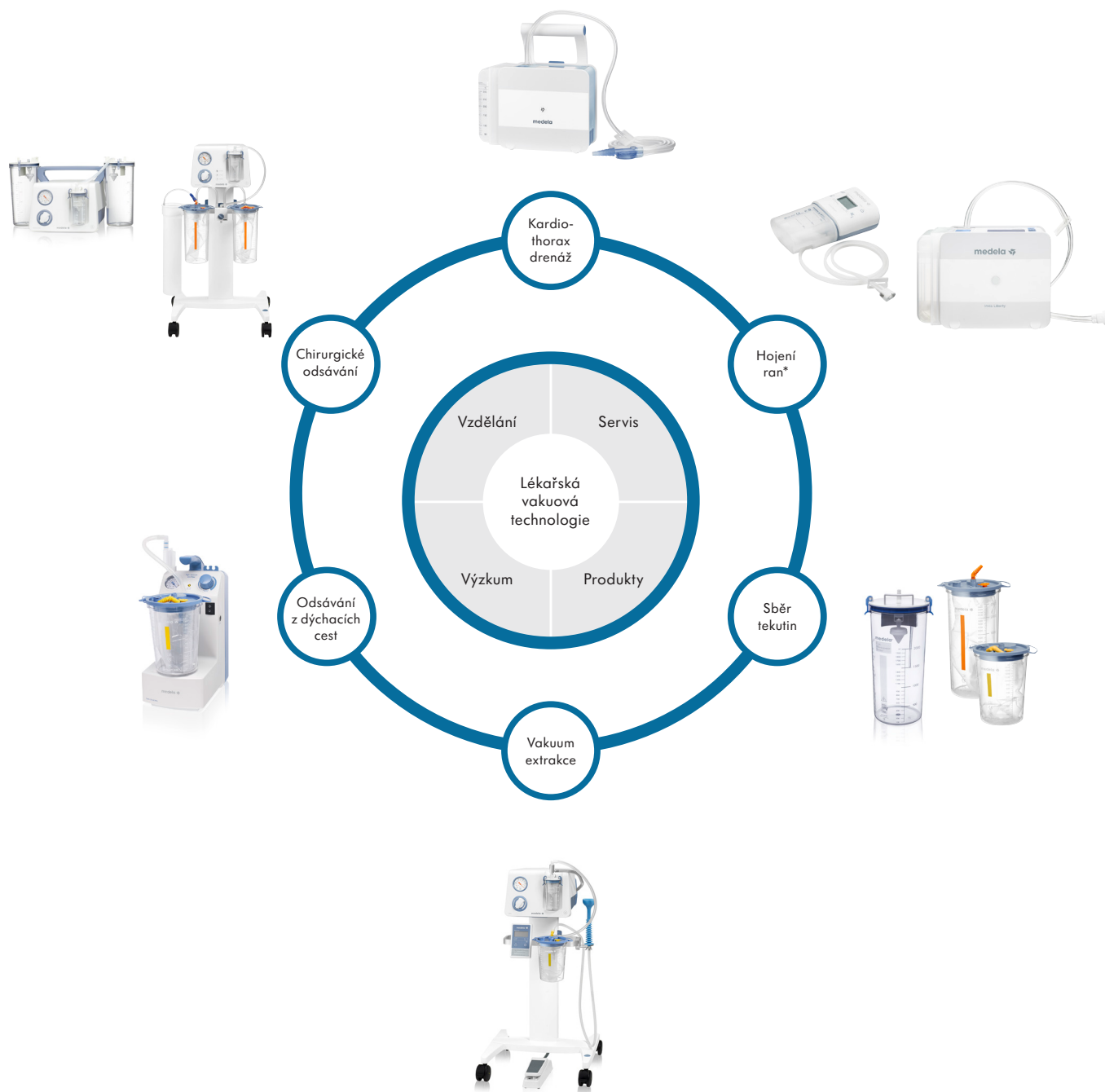
PÍSTOVÝ SYSTÉM	INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE QUATROFLEX™
<ul style="list-style-type: none">• vytváření podtlaku pomocí dvou pístů - u odsávaček Basic a Dominant Flex• vysoké vakuum při nízkých otáčkách 70 ot. / min.• tichý a spolehlivý, bez vibrací• bezúdržbový systém a dlouhá životnost	<ul style="list-style-type: none">• vytváření podtlaku pomocí čtyř pístů - u odsávačky Vario• vysoké vakuum při nízkých otáčkách• odolnost a spolehlivost
MEMBRÁNOVÝ REGULÁTOR VAKUA	VÝKONNÝ MEMBRÁNOVÝ SYSTÉM
<ul style="list-style-type: none">• okamžité přesné zajištění nejvyšší intenzity vakua• rychlejší vytvoření vakua ve srovnání s konvenčními regulátory vakua• zaručuje přesnou regulaci – u odsávaček Vario, Basic a Dominant Flex	<ul style="list-style-type: none">• u odsávačky Clario• vytváří vakuum pomocí pružné membrány z pryže• membrána poskytuje navíc ochranu proti znečištění vnitřní části přístroje

Obsah

PRODUKTOVÁ NABÍDKA A OBLAST POUŽITÍ	6
VÝBĚR ODSÁVAČEK	7
THOPAZ+	8
CLARIO, CLARIO TONI	10
VARIO 18	12
BASIC	14
BASIC VEX	16
DOMINANT FLEX	18
LIPOSUKČNÍ SESTAVA	20
ODSÁVAČKA PROUDOVÁ	22
SBĚRNÝ SYSTÉM JEDNORÁZOVÝ	24
SBĚRNÝ SYSTÉM PRO OPAKOVANÉ POUŽITÍ	26
FILTRY	27
PŘÍSLUŠENSTVÍ	28

Produktová nabídka a oblast použití

Na následujících stránkách naleznete všechny produkty a systémy, které poskytujeme našim zákazníkům napříč širokou škálou specializovaných lékařských aplikací.



* Není v nabídce produktů v rámci České republiky.

Široký výběr odsávaček

Vysoký výkon a efektivita



TYPY ODSÁVAČEK	THOPAZ +	CLARIO	CLARIO TONI	VARIO	BASIC	DOMINANT FLEX	REGULÁTOR VÁKUA
Napájení	AC/DC	AC AC/DC AC/DC DELUXE	AC/DC AC/DC DELUXE	AC AC/DC	AC	AC	
Výrobce	Medela	Medela	Medela	Medela	Medela	Medela	GCE
Sací výkon (l/min)	5	15	15	18	30	60	70
Podtlak (kPa)	-10	-80 (od -18)	-80 (od -9)	-75	-90	-95	-95
Podtlak (mmHg)	-75	-600	-600	-563	-675	-713	-950
OBLAST POUŽITÍ							
Endoskopie					×	×	●
Plastická chirurgie					●	×	
Porodnictví					×	●	
ORL, tracheostomie		×	×	×	●		●
Gastroenterologie					×		
THORAXOVÝ SYSTÉM							
Thoraxové sání	×						
Kardiothoraxové sání	×						
MÍSTA POUŽITÍ							
Transport pacienta	×	×	×	×			
Pohotovost				●	×	●	●
Operační sály	×				●	×	×
ARO	×				×	●	×
JIP	×			●	×	●	×
Lůžkové oddělení	×	×	×	×	●		×
Privátní praxe				●	×		
Zubní chirurgie					×	●	
Pečovatelská služba, LDN		×	×	×	●		
Domácí péče, tracheostomie		×	×				

Vysvětlivky:

× ideální, ● doporučujeme,
napájení: AC - síť, AC/DC - síť/baterie

Thopaz+

Hrudní digitální a monitorovací drenážní systém

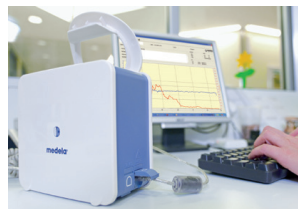
Thopaz+ je **malý a lehký kompaktní přístroj** s integrovaným zdrojem odsávání. Je určen pro monitorování **tlaku, odvádění tekutiny a úniku vzduchu**.

Oblast použití

Hrudní drenáže na oddělení kardiochirurgie, hrudní chirurgie, plicní chirurgie, traumatologie, ARO, JIP.

Medela **Thopaz+** posouvá drenáž hrudníku na novou úroveň péče. Thopaz+ měří nepřetržitě, objektivně únik vzduchu a odtok tekutin. To usnadňuje vyhodnocení rekonvalescence u pacientů, jakož i standardizaci drenáže hrudníku napříč různými odděleními. Data v reálném čase a grafy historie zobrazené na displeji umožňují efektivní klinické rozhodování a přesnou komunikaci mezi ošetřujícími personálem. Integrovaná baterie zajišťuje nepřetržitý provoz (od napojení na drenáž na OP sále, v průběhu převozu, až po vyjmutí drenáže z hrudníku). Neustále měří a reguluje intrapleurální tlak. Jeho lehký a kompaktní design umožňuje včasnou pohyblivost a mobilitu pacienta, což je v souladu s protokolem lepšího zotavení (ERAS). V případě ucpání drenáže, odpojení systému nebo jiných druhů poruch, se aktivují zvukové alarmy, které zabraňují chybám v terapii a případně následnému riziku pro pacienta.

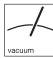
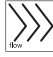

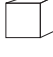



Na základě výše uvedených skutečností lze bolestivé hrudní drenáže odstranit dříve, pobyt v nemocnici zkrátit, což vede k úspoře nákladů nemocnice.



RYCHLÁ FAKTA

- průběžné objektivní digitální monitorování tlaku, odvádění tekutiny a úniku vzduchu
- naměřené parametry k dispozici v reálném čase
- zobrazení trendů za posledních až 72 hodin
- zkrácení doby hrudní drenáže a snížení nákladů nemocnice
- alarmy a informace o stavu přístroje
- indikátor průchodnosti katetrů
- automatické stmívání displeje a tichý provoz
- bateriový provoz min. 4 - 10 hod.
- snadné ovládání a manipulace, lehký, přenosný
- minimální kontaminace přístroje, filtrační systém
- záznam dat a možnost jejich přenos do PC
- lehký, přenosný a kompaktní design
- větší spokojenost zdravotnického personálu a pacientů
- ovládání v českém jazyce

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Podtlak	-10 kPa / -75 mmHg / -100 mbar / cmH ₂ O (±15 %)
	Nízký průtok	5 l/min. (±10%)
	Hmotnost	1 kg, (bal. 1,1 kg)
	Vx ŠxD	228x172x97 mm
	Záruka	2 roky
	Příkon	220 - 240 V, 50 Hz
	Výkon	20 W
	ZP	IIb

SPECIFIKACE

- elektronicky řízený systém bez nutnosti použití vody, tzv. suchý systém
- průběžné monitorování odváděné tekutiny, úniku vzduchu a tlaku
- průtok: 5 l/min
- Podtlak: - 10 kPa nastavitelý v rozsahu -1 až -10 kPa
- Hlučnost: <50 dB
- regulace tlaku: hrudníkem pacienta
- přesnost měření a monitorování úniku vzduchu: +/- 20%
- historie měření, monitorování úniku vzduchu a tekutin: 72 hodin
- zobrazení tendrů: za posledních 72 hodin
- alarmový systém: specifikovaný s uvedením postupů
- grafický displej: průtok vzduchu a množství odváděné tekutiny při nastaveném podtlaku
- dlouhodobé bezpečné nepřetržité sání, provoz na baterii min 4 - 10 hod dle četnosti použití
- přetlakový ventil, automatické stmívání displeje, dvojitá ochrana proti přesátí
- možnost digitální dokumentace – elektronické měření a monitorovací funkce
- možnost uložení záznamu naměřených dat do PC, připojení k PC přes USB konektor
- provoz AC/DC (sítě/baterie), adaptér 12V
- madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem
- možnost zavěšení přístroje i nad úroveň pacienta (nevzniká sifónový efekt)

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- síťový kabel nabíjecí, CD-ROOM

OBJEDNACÍ ČÍSLO

N079.1002 Thopaz+

ZÁRUKA

2 roky

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



N079.0011
N079.0016
N079.0018

Kanystř protipěnicí jednorázový, sterilní
Standardní kanystř pro sběr tekutin
Balení: 0,3l - 12 ks; 0,8l - 6 ks; 2,0l - 12 ks.



N079.0021
(jeden konektor)
N079.0022
(dva konektory)

Hadice jednorázová, sterilní
Dvoulumenná odsávací hadice zajišťuje průběžné sledování tlaku, odsávaného vzduchu a tekutiny.
Pro katetry 20 - 32 Fr.
Délka 1,5 m
Balení: 10 ks



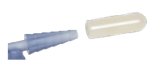
N079.0023
(jeden konektor)
N079.0024
(dva konektory)

Hadice s malými konektory jednorázová, sterilní
Pro katetry do 20 Fr.
Délka 1,5 m
Balení: 10 ks



N079.0025
(jeden konektor)
N079.0026
(dva konektory)

Hadice s velkými konektory jednorázová, sterilní
Pro katetry od 32 Fr.
Délka 1,5 m
Balení: 10 ks



N079.0039

Krytka konektoru hadice, sterilní
Určena pro zaslepení jednoho konektoru pro drenáž u odsávací hadice se 2 konektory.
Balení: 20 ks



N079.0037

Dok nabíjecí
Slouží k nabíjení odsávačky a zabezpečuje přesné měření odsávané tekutiny.
Obsahuje držák na eurolištu nebo může stát na rovné ploše.



N079.0038

Adaptér k doku pro kanystř 2,0l
Slouží jako redukce při umístění kanystř 2l do doku.



N079.0036

Držák s eurolištu pro uchycení na horizontální/vertikální tyč
Pomocí držáku lze odsávačku umístit na horizontální/vertikální tyč tam, kde nejsou k dispozici eurolišty.



N079.0040

Držák univerzální s aretací a eurolištu na horizontální/vertikální tyč
Pomocí držáku lze odsávačku umístit do vodorovné polohy na tyč v jakékoliv poloze.



N079.1006

Popruh transportní
Pro mobilní přenášení odsávačky Thopaz+ přes rameno pacienta.

Podrobný přehled příslušenství - viz strana 28 - 29.

Clario a Clario Toni

Rychlá úleva pro pacienty s tracheostomickým odsáváním

Odsávačka Clario je spolehlivým prostředkem k uvolňování dýchacích cest u dospělých a dětí, Clario TONI u novorozenců a kojenců.

Oblast použití

Tracheostomické sání, odsávání z dýchacích cest. Ideální pro domácí péči a na cesty, pečovatelskou službu, LDN, ambulance, sanitní vozy, lůžková oddělení.

Tři přednastavené úrovně vakua odsávaček Clario a Clario TONI splňují pokyny Americké asociace pro respirační péči (AARC) pro **rychlé a bezpečné odsávání** dýchacích cest u dospělých a dětí. Sání má rychlý nástup díky malé odsávací lahvi.

Trojnásobný hygienický koncept

- plovák v láhvi zabraňuje přesátí
- integrovaná bezpečnostní komora pro zachycení odsáté tekutiny v případě přesátí
- uzavřený membránový systém zamezuje vniknutí tekutiny do odsávačky



Clario











Clario Toni

RYCHLÁ FAKTA



- splňuje specifické potřeby u dětí, kojenců a novorozenců
- pouze dva ovládací prvky
- jednoduchý třístupňový regulátor intenzity odsávání
- napájení síťové (AC) nebo síťové/bateriové (AC/DC)
- připojení kabelem na autobaterii (u verze AC/DC)
- praktická brašna s možností uchycení např. na vozík
- tichý provoz, snadné čištění (láhev s víčkem v myčce)
- malá, lehká, praktická, vhodná i na cesty
- diskrétní použití na veřejnosti

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Clario	-18 / -36 / -80 kPa
	Clario Toni	-9 / -15 / -80 kPa
	Průtok	15l/min.
	AC	1,7 kg
	AC/DC	2 kg
	VxŠxH	223x255x95 mm
	Záruka	2 roky
	Příkon	220 - 240 V, 50 Hz
	Výkon	110 W
	ZP	IIa

SPECIFIKACE	PODTLAK
<ul style="list-style-type: none"> • průtok: 15 l/min • podtlak: membránový regulátor vakua se 3 stupni nastavení • speciální membránový systém zabraňující přesátí • bezpečnostní komora • světelná indikace chodu • madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem • napájení: síť (AC) nebo síť/baterie (AC/DC) • provoz na baterii 50 min. (u verze AC/DC) • možnost připojení kabelem na autobaterii (u verze AC/DC) 	<p>Clario</p> <p>minimum: -18 kPa / -135 mmHg (± 15%) medium: -36 kPa / -270 mmHg (± 15%) maximum: -80 kPa / -600 mmHg (± 15%)</p> <p>Clario Toni</p> <p>minimum: -9 kPa / -70 mmHg (± 28%) medium: -15 kPa / -115 mmHg (± 26%) maximum: -80 kPa / -600 mmHg (± 15%)</p>

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	OBJEDNACÍ ČÍSLO	ZÁRUKA
<ul style="list-style-type: none"> • 1x set - láhev 0,5l + víčko s plovákem proti přesátí (nelze autoklávovat) • 1x hadice odsávací 5,5/8,5 mm, konektor/FingerTip, jednorázová, sterilní, 150 cm • 1x síťový kabel • 1x baterie NiMH (u verze AC/DC) 	<p>N014.0014 Clario AC</p> <p>N014.0114 Clario AC / DC</p> <p>N014.0214 Clario AC / DC DeLuxe (v brašně s náhradní lahví a víčkem)</p> <p>N014.0024 Clario TONI AC / DC</p> <p>N014.0028 Clario TONI AC / DC DeLuxe (v brašně s náhradní lahví a víčkem)</p>	2 roky

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
	N074.0001	Set - láhev 0,5l + víčko Polykarbonátová láhev s víčkem	
	N074.0003	Hadice odsávací PVC, konektor/FingerTip Jednorázové, sterilní Průměr: 5,5/8,5 mm CH 25 Délka: 1,5 m	
	N074.0007	Brašna Tvrdý materiál Úchyt na vozík	
	N074.0017	Kabel pro připojení na autobaterii Pro verzi AC/DC 12 V - DC	

Podrobný přehled příslušenství - viz strana 29.

Vario 18

Všestranná a mobilní

Odsávačka Vario 18 nabízí nízkou hladinu hluku, spolehlivý výkon a mobilitu.

Bateriová verze je ideální pro přepravu pacientů.

Oblast použití

Odsávání z dýchacích cest a malé chirurgické zákroky. Vhodná pro lůžková oddělení, JIP, ambulance, pečovatelskou službu, privátní praxi, sanitní vozy, domácí péči.

Vysoká bezpečnost odsávání je zajištěna aretačním tlačítkem, které zabráňuje náhodnému přenastavení vakua.



Pojízdná verze



RYCHLÁ FAKTA

- rychlé vytvoření podtlaku speciální pístovou technologií QuatroFlex
- přesné nastavení vakua membránovým regulátorem
- bezpečnostní aretační tlačítko zabráňuje náhodnému přenastavení vakua
- možnost uchycení na eurolištu nebo na vozík s eurolištu
- Integrované držáky odsávací hadice a lahví
- madlo pro snadnou manipulaci
- napájení síťové (AC) nebo síťové/bateriové (AC/DC) 30 min.
- připojení kabelem na autobaterii (u verze AC/DC)
- snadné nastavení, použití a čištění
- tichý provoz bez vibrací
- dlouhá životnost
- malá, lehká, praktická
- doporučeno použití virových filtrů Medela

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Podtlak	-75 kPa / -563 mmHg (±10%)
	Průtok	18l/min.
	AC AC/DC	3.5 kg 4.2 kg
	VxŠxH	380x170x285 mm
	Výdrž baterie	30 minut
	Záruka	2 roky
	Příkon	220 - 240 V, 50 Hz
	Výkon	80 W
	ZP	IIa

SPECIFIKACE

- průtok: 18 l/min
- podtlak: -75 kPa
- čtyřpístový odsávací systém pro rychlý nástup vakua - technologie QuatroFlex
- bezolejový systém, bezolejová převodovka
- membránový bezpečnostní regulátor pro přesné nastavení vakua
- blokáce nastaveného vakua
- madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem
- integrovaný držák odsávací hadice
- dva integrované držáky lahví
- světelná indikace chodu odsávačky
- tichý chod bez vibrací
- možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání
- bezúdržbový provoz
- min. dvoustupňová ochrana proti přesátí
- barevně značený manometr
- VIRUS filtr kombinovaný s ochranou proti přesátí
- možnost připojení pojistné nádoby s víčkem proti přesátí – polysulfonové, autoklávovatelné
- možnost upevnění na eurolištu
- možnost upevnění na vozík s eurolištu
- napájení: síť (AC) nebo síť/baterie (AC/DC)
- provoz na baterii 30 – 120 min. dle nastaveného podtlaku (u verze AC/DC)
- možnost připojení kabelem na autobaterii (u verze AC/DC)

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ







- 5x virový filtr kombinovaný proti přesátí, jednorázový
- 1x hadice propojovací silikonová 7/12, autoklávovatelná, 25 cm
- 1x spojka propojovací přímá, autoklávovatelná
- 1x spojka propojovací 90°, autoklávovatelná
- 1x síťový kabel
- 1x hadice patientská silikonová 7/12, autoklávovatelná, 180 cm
- 1x baterie NiMH (u verze AC/DC)

OBJEDNACÍ ČÍSLO

N026.2112 MEDELA Vario 18 AC 2 roky
 N026.5112 MEDELA Vario 18 AC/DC 2 roky

ZÁRUKA

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	N077.0511	Vozík s eurolištu pro odsávačku Vario a centrální sání Pětiramenný, brzděná kolečka
	N077.0821	Držák se šroubem na eurolištu, 10 x 25 mm Pro uchycení odsávačky Vario na eurolištu
	N077.0105	Adaptér pro láhev na Medela vak Adaptér slouží k uchycení láhve pro Medela vaky
	N077.0831	Brašna Pro bezpečnou přepravu Varia a příslušenství Pevné pouzdro s ramenním popruhem a kapsami
	N077.0832	Kabel pro připojení na autobaterii Pro provoz odsávačky Vario AC/DC v autě 12V DC kabel
	N077.0743	Košík k vozíku odsávaček
Sběrný systém	Možnost výběru mezi jednorázovým systémem (Medela vaky) nebo systémem pro opakovatelné použití (autoklávovatelné láhve).	

Podrobný přehled příslušenství - viz strana 29 - 30.

Basic

Výkonná a tichá

Vysoký výkon odsávání díky spolehlivé pístové technologii.

Oblast použití

Vhodná pro odsávání tělních tekutin. Využití na ARO, JIP, lůžková odd., operační sály, ORL, urologii, endoskopii, gastroenterologii, gynekologii, vakuum extrakce, ORL, neonatologii, pediatrii, dentální kliniky a čelistní chirurgie, pohotovost, privátní lékařské praxe, LDN.

Basic odbourává hygienické problémy díky jednodílnému krytu a dotykovému tlačítku **CleanTouch ON/ OFF**, které současně zkracují dobu čištění.

Pomalý chod pohonné jednotky zajišťuje **velmi tichý provoz**. Zjednodušená vnitřní konstrukce odsávačky Basic minimalizuje úsilí potřebné pro rutinní kontroly a šetří náklady na provoz a údržbu.



Přenosná verze
bez madla



Přenosná verze
s madlem



Pojízdná verze

RYCHLÁ FAKTA

- pístový systém pro rychlé vytvoření vakua během několika vteřin
- membránový regulátor vakua pro přesný sací výkon
- hygienický koncept: jednodílný kryt, dotykové tlačítko CleanTouch ON/OFF
- vhodná pro každý typ endoskopického systému
- spolehlivý nepřetržitý provoz
- výkonná a velmi tichá
- dlouhá životnost
- přenosná nebo pojízdná verze
- doporučeno použití virových filtrů Medela

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Podtlak	-90 kPa / - 675 mmHg
	Průtok	30 l/min.
	Přenosná verze Pojízdná verze	9,3 kg 16 kg
	VxŠxH	210x305x375 mm (přenosná verze) 965x510x480 mm (pojízdná verze)
	Záruka	5 let
	Příkon	220 - 240 V, 50 Hz
	Výkon	50 W
	ZP	IIa








SPECIFIKACE

- pístový odsávací systém s velmi rychlým nástupem vakua
- průtok: 30 l/min
- podtlak: - 90 kPa
- hlučnost: jen 36,3 dB
- nízkootáčkový sací systém
- hygienický koncept: jednoduchý kryt, dotykové tlačítko ON/OFF
- možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání – 24 hodin i více
- bezúdržbový provoz, bezmazný systém, bezolejová převodovka
- membránový bezpečnostní regulátor pro přesné nastavení vakua
- třístupňová ochrana proti přesátí
- integrovaný držák pro 2 láhve
- světelná indikace chodu
- barevně značený manometr
- spolehlivý chod bez vibrací
- madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem
- možnost připojení nožního spínače ON/OFF nebo nožního regulátoru vakua
- možnost připojení na vozík s eurolišťou a brzděnými antistatickými kolečky

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	OBJEDNACÍ ČÍSLO	ZÁRUKA
• 1x láhev pojistná 0,25l proti přesátí, PS, autoklávovatelná	N071.0000	MEDELA Basic s madlem 5 let
• 1x víčko pro láhev pojistnou, PS, autoklávovatelná	N071.0001	MEDELA Basic bez madla 5 let
• 1x hadice propojovací silikonová 7/12, autoklávovatelná, 60 cm		(vhodný do endo věží)
• 2x spojka propojovací přímá, autoklávovatelná		
• 1x síťový kabel		
• 1x hadice patientská silikonová 7/12, autoklávovatelná, 180 cm		

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	N077.0741	Vozík s eurolišťou Kolečka antistatická, 2 brzděná a 2 bez brzdy.
	N077.0521	Držák láhve na eurolišťou, plastový Držák slouží pro uchycení všech typů lahví Medela na eurolišťou.
	NB011600003	Zásobník katetrů, nerezový VxŠxH: 500x100x100 mm
	N077.0563	Přepínač vakua Přepínač vakua slouží k manuálnímu přepnutí odsávání do jedné nebo druhé láhve.
	N077.0751 N077.0752	Držák hadice na eurolišťou – levý Držák hadice na eurolišťou – pravý Celonerezový držák je určen pro bezpečné uchycení/odložení odsávací patientské
	N077.0747	Držák síťové šňůry / nožního spínače na eurolišťou Držák je určen k bezpečnému uchycení síťové šňůry nebo nožního spínače ON/OFF odsávaček Medela. Lze jej zavěsit přímo na eurolišťou vozíku, na kterém je odsávačka umístěna.
	N077.0743	Košík k vozíku odsávaček
Sběrný systém	Možnost výběru mezi jednorázovým systémem (Medela vaky) nebo systémem pro opakovatelné použití (autoklávovatelné láhve).	

Podrobný přehled příslušenství - viz strana 30 - 34.

Basic

Kompletní systém pro vakuovou extrakci

Kombinace odsávačky a vakuum extraktorů vytváří kompletní řešení pro vakuově asistovaný porod.

Oblast použití

Gynekologie – porodní sály

System pro vakuovou extrakci Medela nabízí spolehlivost a flexibilitu, když je během porodu nutné použít vakuum extraktory.

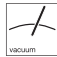
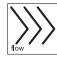

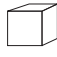



Odsávačka Basic nabízí **rychlé a efektivní vytváření vakua** a jeho přesné nastavení. Díky aktivnímu vakuu je vakuum extraktor pevně fixován na hlavě plodu, zabraňuje jeho potenciálnímu neúmyslnému uvolnění



RYCHLÁ FAKTA

- maximálně bezpečná a šetrná pro matku a dítě
- pístový systém pro rychlé vytvoření vakua během několika vteřin
- membránový regulátor vakua pro přesný sací výkon
- menší kolísání vakua díky zásobníku (odsávací láhvi)
- spolehlivý nepřetržitý provoz
- velmi tichá a výkonná
- hygienický koncept: jednoduchý kryt, dotykové tlačítko CleanTouch ON/OFF
- snadné čištění a údržba
- dlouhá životnost
- doporučeno použití nožního regulátoru vakua
- doporučeno použití virových filtrů Medela

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Podtlak	-90 kPa / - 675 mmHg
	Průtok	30 l/min.
	Hmotnost	16 kg
	VxŠxH	965x510x480 mm
	Záruka	5 let
	Příkon	220 - 240 V, 50 Hz
	Výkon	50 W
	ZP	Ila

SPECIFIKACE

- pístový odsávací systém s velmi rychlým nástupem vakua
- průtok: 30 l/min
- podtlak: - 90 kPa
- hlučnost: jen 36,3 dB
- nízkootáčkový sací systém: 70 ot./min.
- hygienický koncept: jednoduchý kryt, dotykové tlačítko ON/OFF
- možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání – 24 hodin i více
- bezúdržbový provoz, bezmazný systém, bezolejová převodovka
- membránový bezpečnostní regulátor pro přesné nastavení vakua
- ochrana proti přesátí
- integrovaný držák pro 2 láhve, madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem
- světelná indikace chodu, barevně značený manometr
- odsávačku je doporučeno upevnit na vozík s eurolišťou a brzděnými antistatickými kolečky
- možnost připojení nožního regulátoru vakua

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 1x láhev pojistná 0,25l proti přesátí, PS, autoklávovatelná
- 1x víčko pro láhev pojistnou, PS, autoklávovatelné
- 1x hadice propojovací silikonová 7/12, autoklávovatelná, délka 60 cm
- 2x spojka propojovací přímá, autoklávovatelná
- 1x síťový kabel
- 1x hadice patientská silikonová 7/12, autoklávovatelná, délka 180 cm














OBJEDNACÍ ČÍSLO

N071.0000 MEDELA Basic

ZÁRUKA

5 let

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	N077.0741	Vozík s eurolišťou Kolečka antistatická, 2 brzděná a 2 bez brzdy.	
	K077.0761 (Ø 50 mm - modrý)	Silc Cup Silikonový zvon pro vakuum extrakci, autoklávovatelný Průměry: Ø 50 a 60 mm	
	K077.0762 (Ø 60 mm - žlutý)		
	K077.0078	Silc Cup Trumpet s nerezovým ventilem a držákem Silikonový zvon pro vakuum extrakci, autoklávovatelný Průměr: Ø 60 mm	
	K077.0080	CaesAid Cup Silikonový zvon pro vakuum extrakci, autoklávovatelný Průměr: Ø 60 mm	
	K077.0731	Regulátor vakua nožní, vhodný pro vakuum extrakce	
	N077.0521	Držák láhve na eurolišťou, plastový Držák slouží pro uchycení všech typů lahví Medela na eurolišťou.	
	N077.0751	Držák hadice na eurolišťou – levý	
	N077.0752	Držák hadice na eurolišťou – pravý Celonerezový držák je určen pro bezpečné uchycení/odložení odsávací patientské hadice	
	K017.0015	Apgar Timer s úchytem na eurolišťou Provoz na baterii Akustický signál po 1, 5 a 10 minutách	
Sběrný systém	Možnost výběru mezi jednorázovým systémem (Medela vaky) nebo systémem pro opakovatelné použití (autoklávovatelná láhve).		

Podrobný přehled příslušenství - viz strana 30 - 34.

Dominant Flex

Multifunkční odsávačka

Dominant Flex lze použít pro spolehlivé výkonné odsávání tělních tekutin. Nabízí **vyjímavné nastavení tří průtoků** 40 l/min., 50 l/min. nebo 60 l/min.

Oblast použití

Vhodná pro zákroky, které vyžadují proměnné průtoky: OP sály, chirurgie, neurochirurgie, ortopedie, traumatologie, ORL, endoskopie, porodní sály, plastické chirurgie - liposukce.

Dominant Flex odbourává hygienické problémy díky jednoduchému krytu a dotykovému tlačítku **CleanTouch ON/ OFF**, které současně zkracují dobu čištění.

Pomalý chod pohonné jednotky zajišťuje **velmi tichý provoz**. Zjednodušená vnitřní konstrukce odsávačky Dominant Flex minimalizuje úsilí potřebné pro rutinní kontroly a šetří náklady.

Další ochranu je možné zajistit použitím virových nebo bakteriálních filtrů.



Přenosná verze



Pojízdná verze

RYCHLÁ FAKTA

- univerzální multifunkční odsávačka pro více aplikací
- volba průtoku 40 / 50 / 60 l/min.
- pístový systém pro rychlé vytvoření vakua během několika vteřin
- membránový regulátor vakua pro přesný sací výkon
- hygienický koncept: jednoduchý kryt, dotykové tlačítko CleanTouch ON/OFF
- vhodná pro endoskopické systémy
- spolehlivý nepřetržitý provoz
- výkonná a velmi tichá
- dlouhá životnost
- přenosná nebo pojízdná verze
- doporučeno použití virových filtrů Medela

TECHNICKÉ ÚDAJE







	Podtlak	-95 kPa	-713 mmHg
	Průtok	40/50/60 l/min. (± 5 l/min.)	
	Přenosná verze	9,3 kg	
	Pojízdná verze	16 kg	
	VxŠxH	210x305x375 mm (přenosná verze) 965x510x480 mm (pojízdná verze)	
	Záruka	5 let	
	Příkon	220 - 240 V, 50 Hz	
	Výkon	50 W	
	ZP	IIa	

SPECIFIKACE

- pístový odsávací systém s velmi rychlým nástupem vakua
- proměnné průtoky 40 / 50 / 60 l/min.
- podtlak: - 95 kPa
- hlučnost: 37,8 / 38,4 / 39,8 dB
- 3 tlačítka One-Touch pro požadovaný průtok
- nízkootáčkový sací systém
- hygienický systém: jednodílný kryt, dotykové tlačítko ON/OFF
- možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání – 24 hodin i více
- bezúdržbový provoz, bezmazný systém, bezolejová převodovka
- membránový bezpečnostní regulátor pro přesné nastavení vakua
- třístupňová ochrana proti přesátí
- světelná indikace chodu
- barevně značený manometr
- spolehlivý chod bez vibrací
- možnost připojení nožního spínače ON/OFF nebo nožního regulátoru vakua
- možnost připojení na vozík s eurolišťou a brzděnými antistatickými kolečky

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	OBJEDNACÍ ČÍSLO	ZÁRUKA
<ul style="list-style-type: none"> • 1x láhev pojistná 0,25l proti přesátí, PS, autoklávovatelná • 1x víčko pro láhev pojistnou, PS, autoklávovatelné • 1x hadice propojovací silikonová 7/12, autoklávovatelná, délka 60 cm • 2x spojka propojovací přímá, autoklávovatelná • 1x síťový kabel • 1x hadice patientská silikonová 7/12, autoklávovatelná, 180 cm 	N071.0003 MEDELA Dominant Flex	5 let

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	N077.0741	Vozík s eurolišťou Kolečka antistatická, 2 brzděná a 2 bez brzdy.
	N077.0521	Držák láhve na eurolišťou, plastový Držák slouží pro uchycení všech typů lahví Medela na eurolišťou.
	N077.0563	Přepínač vakua Přepínač vakua slouží k manuálnímu přepnutí odsávání do jedné nebo druhé láhve. Délka hadice: 30 cm
	N077.0723	Spínač nožní ON/OFF Délka kabelu: 3.5 m
	N077.0751 N077.0752	Držák hadice na eurolišťou – levý Držák hadice na eurolišťou – pravý Celonerezový držák je určen pro bezpečné uchycení/odložení odsávací patientské hadice
	N077.0747	Držák síťové šňůry / nožního spínače na eurolišťou Držák je určen k bezpečnému uchycení síťové šňůry nebo nožního spínače ON/OFF odsávaček Medela. Lze jej zavěsit přímo na eurolišťou vozíku, na kterém je odsávačka umístěna.
Sběrný systém	Možnost výběru mezi jednorázovým systémem (Medela vaky) nebo systémem pro opakovatelné použití (autoklávovatelné láhve).	

Podrobný přehled příslušenství - viz strana 30 - 34.

Liposukční sestava

Kompletní systém pro infiltraci a odsávání

Liposukční sestava je určena pro výkony infiltrace a odsávání při odstraňování tukové tkáně formou tumescenční liposukce.

Oblast použití

Plastická chirurgie - liposukce.

Sestava pro liposukci

DOMINANT FLEX - odsávačka MEDELA

- nejvýkonnější chirurgická odsávačka s proměnnými průtoky
- pístový systém s velmi rychlým nástupem vakua do 10 vteřin
- průtok volitelný, nastavitelný: 40 / 50 / 60 l/min.
- podtlak: - 95 kPa
- membránový bezpečnostní regulátor pro přesné nastavení vakua
- optimalizována pro maximální hygienu a sníženou dobu čištění
- vysoká spolehlivost a dlouhá životnost
- tichý bezúdržbový provoz
- záruka 5 let

DP30 LipoPlus - infiltrační pumpa NOUVAG

- pumpa je navržena speciálně pro infiltraci kapaliny při odstraňování tukové tkáně formou tumescenční liposukce
- po aplikaci je procedura liposukce snadnější, bezpečná a zanechává příznivé kosmetické výsledky
- průtok: 1–27 l/h
- plynulá regulace průtoku nožním pedálem Vario
- záruka 2 roky



RYCHLÁ FAKTA

- výkonná liposukční sestava pro infiltraci a odsávání
- umístěním přístrojů na dvojitý vozík vzniká ucelený systém
- úsporné prostorové řešení
- spolehlivý nepřetržitý provoz
- tichý chod a dlouhá životnost
- široká škála příslušenství pro infiltraci, odsávání a sběr tekutin

Podrobný přehled příslušenství - viz strana 30.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

INFILTRACE



N6022

infiltrační set jednorázový, sterilní
Určen pro aplikaci infiltrační kapaliny.

Min. objednávací množství bal. 10 ks



N15885492

Infiltrační jehla jednorázová sterilní
Určena pro aplikaci infiltrační kapaliny.
1,1 x 120 mm (balení: 100 ks)
Možnost dodání i jiných velikostí - katalog na vyžádání



N46943-58

Držák s infiltračními kanylami nerez
Katalog na vyžádání

ODSÁVÁNÍ



N46943-57

Držák s odsávacími kanylami nerez
Katalog na vyžádání

Vibrační liposukce NOUVAG

LIPOSURG - Kompaktní infiltrační systém pro vibrační liposukci

- kombinovaný systém infiltrační pumpy a mikroprocesorem
- řízeného vibračního motorového systému
- šetří lékaři čas, fyzickou námahu a umožňuje mu jemné provádění operačních zákroků
- plynulá regulace průtoku nožním pedálem Vario
- průtok až 27 litrů / hod.



Odsávačka proudová

Přenosná verze

Oblast použití

Vhodná pro ARO, JIP a všechna oddělení s lůžky umístěnými poblíž centrálních rozvodů vakua.

Láhev lze umístit na eurolištu, pevnou plochu nebo lůžko pacienta.



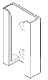





REGULÁTOR VAKUA GCE

Regulátor Medievac+ 1000 s rychlospojkou

- podtlak: -95 kPa / -950 mbar
- průtok: 70 l/min. +/- 5%
- otočný manometr 360 °, barevně značený
- diagonální nastavení přepínače zapnuto/vypnuto
- pojistný ventil (- 250 mbar) na ochranu pacienta
- plynulá regulace podtlaku z centrálního rozvodu vakua
- hadicový nástavec
- záruka 2 roky



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	N0735138	Regulátor vakua GCE Medievac+ 1000 s rychlospojkou	
	N077.0521	Držák láhve na eurolištu, plastový Držák slouží pro uchycení všech typů lahví Medela na eurolištu.	
	N077.0523	Držák láhve "C" na přišroubování, plastový	
	N077.0522	Držák láhve na lůžko, nerezový	
	N077.1018	Spojka propojovací přímá Autoklávovatelná	
	N077.0900	Hadice odsávací silikonová 7/12 Autoklávovatelná Metráž	
Sběrný systém	Možnost výběru mezi jednorázovým systémem (Medela vaky) nebo systémem pro opakovatelné použití (autoklávovatelné láhve).		

Podrobný přehled příslušenství - viz strana 30.

Odsávačka proudová

Pojízdná verze

Oblast použití

Vhodná pro ARO, JIP a všechna oddělení s lůžky umístěnými poblíž centrálních rozvodů vakua.

Láhev je uchycena na pojízdném vozíku.








REGULÁTOR VAKUA GCE

Regulátor Medievac+ 1000 s držákem na eurolištu, rychlospojkou a vakuovu propojovací hadicí

- podtlak: -95 kPa / -950 mbar
- průtok: 70 l/min. +/- 5%
- otočný manometr 360 °, barevně značený
- diagonální nastavení přepínače zapnuto/vypnuto
- pojistný ventil (- 250 mbar) na ochranu pacienta
- plynulá regulace podtlaku z centrálního rozvodu vakua
- hadicový nástavec
- záruka 2 roky



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	N0735148	Regulátor vakua GCE Medievac+1000 s držákem na eurolištu, vakuovou hadicí a rychlospojkou	
	N077.0511	Vozík s eurolištou Pětiramenný, brzděná kolečka	
	N077.0521	Držák láhve na eurolištu, plastový Držák slouží pro uchycení všech typů lahví Medela na eurolištu.	
	N077.1018	Spojka propojovací přímá Autoklávovatelná	
	N077.0900	Hadice odsávací silikonová 7/12 Autoklávovatelná Metráž	
Sběrný systém	Možnost výběru mezi jednorázovým systémem (Medela vaky) nebo systémem pro opakovatelné použití (autoklávovatelné láhve).		

Podrobný přehled příslušenství - viz strana 30.

Jednorázový sběrný systém

Maximální hygiena - ochrana personálu i pacienta

Jednorázový sběrný systém splňuje dvě základní potřeby – jednoduchou manipulaci a vysokou hygienickou bezpečnost.

Jednoduchá manipulace

- zřetelné barevné rozlišení objemu vaků i lahví zabraňuje jejich možné záměně
- pojistná spona fixuje láhev v držáku - při vyjmutí vaku zůstává láhev bezpečně uchycena v držáku
- vakuový vstup v integrovaném držáku láhve umožňuje, aby během výměny vaku zůstala vakuová hadice stále propojena
- úhlová spojka patientské hadice o průměru až 11 mm
- umožňuje odsátí velkých částic a zabraňuje zalomení hadice
- dva úchyty na vaku umožňují snadnou obsluhu pravou nebo levou rukou
- polykarbonátovou láhev lze desinfikovat až na 100 °C
- vaky s krystalizátorem nebo bez něj (krystalizátor způsobuje ztuhnutí sekretu)
- láhve lze propojit do série pomocí konektorů nebo přepínače vakua
- flexibilní - možnost dodání vaku s PVC odsávací hadicí, přerušovačem sání - FingerTipem nebo stop ventilem

Vysoká bezpečnost

- možnost použití vaku u jednoho pacienta až 4 dny (ekonomická úspora)
- dvouvrstvý vak zajišťuje maximální pevnost a zabraňuje prostupování zápachu
- materiál Polyamid/Polyethylen
- skladovatelnost 3 roky od data výroby uvedeného na obalu/krabici i víčku vaku
- barva značení: 1,5 l systém – žlutá, 2,5 l systém – oranžová
- bez krystalizátoru nebo s krystalizátorem

RYCHLÁ FAKTA













- Bezpečný, hygienický sběr a likvidace tekutin
- Snadná manipulace, ovládání jednou rukou
- Integrovaný bakteriální filtr a předfiltr s vysokým průtokem a přepadem
- Vysoce odolné dvouvrstvé vaky odolné proti prasknutí
- **Doporučeno použití virových filtrů Medela.**



MEDELA VAK OBSAHUJE

- víčko
- patientský vstup s úhlovou spojkou a ucpávkou
- vstup pro sériové propojení a ucpávku
- 2 úchyty
- ochranný kryt proti přesátí
- zpětný ventil s navigací kapaliny zabraňující zpětnému toku sekretu a snižující pěnění
- filtrační komoru
- předfiltr, který zabraňuje průchodu kouře a částic aerosolu do filtru
- bakteriální a hydrofobní filtr s lapačem nečistot

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	N077.0082 (1.5l) N077.0085 (2.5l)	Láhev pro Medela vaky Opakovaně použitelná Vyrobeno z nerozbitného a snadno čistitelného polykarbonátu Objem: 1,5 a 2,5l	
	N077.0083 (1.5l) N077.0086 (2.5l)	Medela vaky Objem: 1,5 a 2,5l	
	N077.0084 (1.5l) N077.0087 (2.5l)	Medela vak se stužovadlem Objem: 1,5l a 2,5l	
	N077.0095	Konektor vakuový pro sériové propojení Medela vaků, autoklávatelný Silikónový Délka: 25 cm Průměr: Ø 7 x 12 mm	
	N077.0158	Konektor patientský pro sériové propojení Medela vaků, jednorázový Délka: 34 cm Průměr: Ø 8 x 12 mm	
	N077.0094	Nádobka pro odběr vzorků na Medela vak, jednorázová Určena pro odběr vzorků při odsávání Balení: 10 ks	

Podrobný přehled příslušenství - viz strana 30.

System pro opakované použití

Modulární a kompatibilní

Jednoduché použití při zachování maximální bezpečnosti.

LÁHVE

- vyrobeny z velmi kvalitního polysulfonu odolného proti nárazu a vysoké teplotě - možnost autoklávování do 134°C
- objem lahví: 0,25, 0,5, 1, 2, 3 a 5 litrů
- možnost propojení do série
- variabilní držáky lahví

VÍČKA

- víčka s integrovaným těsněním jsou vylisována z jednoho druhu materiálu
- díky této speciální technologii nedochází k nežádoucímu pnutí materiálu při autoklávování
- pojistný ventil zabraňuje přesátí
- víčko velké – pro láhve 1, 2, 3 a 5 litrů
- víčko malé – pro láhve 0,25 a 0,5 litru

FILTRY

- filtr bakteriologický
- filtr virový
- viz strana 27



RYCHLÁ FAKTA

- Snadno čitelné stupnice označující objem kapaliny.
- Nádoba vyrobena z vysoce kvalitního, nárazuvzdorného a autoklávovatelného polysulfonu.
- Jedna velikost víčka vhodná pro všechny velikosti nádob, vyrobena z vyztuženého polyamidu se santoprenovým těsněním.
- **Doporučeno použití bakteriálních nebo virových filtrů Medela.**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



N077.0125 (0.25l)
N077.0155 (0.5l)
N077.0110 (1 l)
N077.0120 (2l)
N077.0130 (3l)
N077.0150 (5l)

Láhev polysulfonová
Autoklávovatelná
Objem 0,25, 0,5, 1, 2, 3 a 5 litrů



N077.0420 (Ø 6–10 mm)

Víčko velké
Autoklávovatelné
Pro láhve polysulfonové objemu 1, 2, 3 a 5 litru.



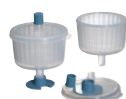
N077.0440

Víčko malé
Autoklávovatelné
Pro láhve polysulfonové objemu 0,25 a 0,5 litru.



N077.0542

Konektor pro sériové propojení lahví,
Autoklávovatelný



N077.0562 (Ø 6–10 mm)

Nádobka pro odběr vzorků na víčko, jednorázová
Určena pro odběr vzorků při odsávání
Balení: 10 ks



Podrobný přehled příslušenství - viz strana 30.

Filtry jednorázové

Při použití sběrného systému pro opakované použití, kdy se nepoužívají jednorázové vaky obsahující bakteriální filtr, je nutné elektrickou odsávačku nebo centrální rozvody vakua opatřit samostatným bakteriologickým nebo ještě lépe virovým filtrem.

Bakteriální i virové filtry Medela lze použít dle daného typu jak pro odsávací systémy Medela, tak pro odsávací systémy jiných výrobců.

Výměna filtru:

- v případě přesátí, ucpání
- týdně při použití jedním pacientem
- denně při použití více pacienty

BAKTERIÁLNÍ FILTRY

Bakteriální filtr Medela zabraňuje průniku bakterií o průměru 0,8 až 1,2 μm a může tedy zamezit křížové kontaminaci bakterií. Filtrační kapacita bakteriálního filtru je 99,985 % pro částice větší než 0,3 μm .

- N077.0571 Filtr MEDELA kombinovaný proti přesátí/ bakteriologický, konektor Medela - bal. 10 ks
- N077.0572 Filtr MEDELA kombinovaný proti přesátí/bakteriologický, konektor kónický - bal. 10 ks
- N077.0573 Filtr MEDELA bakteriologický, konektor Medela - bal. 10 ks
- N077.0575 Filtr MEDELA kombinovaný protipachový uhlíkový/ bakteriologický, konektor Medela - bal. 10 ks

VIROVÉ FILTRY

Virové filtry zajišťují větší ochranu než filtry bakteriologické a je doporučeno je používat i v kombinaci s odsávacími vaky jak u elektrických odsávaček, tak u centrálních rozvodů vakua.

- N101035263 VIRUS FILTR MEDELA kombinovaný proti přesátí, konektor Medela - bal. 10 ks
- N101035264 VIRUS FILTR MEDELA kombinovaný proti přesátí, konektor kónický - bal. 10 ks
- N101035265 VIRUS FILTR MEDELA, konektor Medela - bal. 10 ks



Jednorázový bakteriologický nebo virový













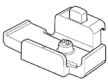
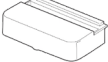
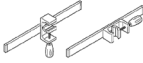





Jednorázový proti přesátí/ bakteriologický nebo virový

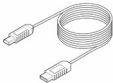


















Jednorázový uhlíkový protipachový/ bakteriologický nebo virový



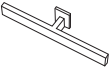






RYCHLÁ FAKTA








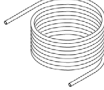







- koronavirus a podobné viry mají průměr **cca 0,12 μm**
- virové filtry Medela byly testovány pomocí bakteriofágu Phi X174 o průměru **cca 0,036 μm**
- filtrační účinnost virových filtrů Medela je větší než 99,99987 %, tj. pravděpodobnost, že 1 virus z 1.000.000 může proniknout virovým filtrem Medela
- filtrační kapacita virových filtrů je 99,9984 % pro částice **větší než 0,03 μm**
- filtrují všechny typy koronavirů: 2019-nCoV, SARS-CoV, HCoV NL 63 a HKUI
- filtrují také jiné typy virů a bakterií
- nízký odpor vzduchu díky velké ploše filtru



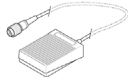



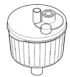
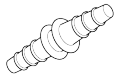
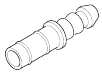






OBJ. ČÍSLO	NÁZEV A POPIS	OBRÁZEK
Příslušenství THOPAZ/THOPAZ+		
N079.0011	Kanistr protipěnicí 0,3l, jednorázový, sterilní, Thopaz/Thopaz+ Balení: 12 ks	
N079.0016	Kanistr protipěnicí 0,8l, jednorázový, sterilní, Thopaz/Thopaz+ Balení: 6 ks	
N079.0018	Kanistr protipěnicí 2,0l, jednorázový, sterilní, Thopaz/Thopaz+ Balení: 12 ks	
N079.0021	Hadice s 1 konektorem, jednorázová, sterilní, Thopaz/Thopaz+ Balení: 10 ks	
N079.0022	Hadice se 2 konektory, jednorázová, sterilní, Thopaz/Thopaz+ Balení: 10 ks	
N079.0023	Hadice s 1 malým konektorem jednorázová, sterilní, Thopaz/Thopaz+ Balení: 10 ks	
N079.0024	Hadice se 2 malými konektory jednorázová, sterilní, Thopaz/Thopaz+ Balení: 10 ks	
N079.0025	Hadice s 1 velkým konektorem jednorázová, sterilní, Thopaz/Thopaz+ Balení: 10 ks	
N079.0026	Hadice se 2 velkými konektory jednorázová, sterilní, Thopaz/Thopaz+ Balení: 10 ks	
N079.0039	Krytka konektoru hadice, sterilní, Thopaz/Thopaz+ Balení: 20 ks	
N079.0037	Dok nabíjecí, Thopaz/Thopaz+	
N079.0038	Adaptér k doku pro kanistr 2,0l	
N079.0036	Držák s eurolišťou pro uchycení na horizontální/vertikální tyč, Thopaz/Thopaz+	
N079.0040	Držák univerzální s aretací a eurolišťou na horizontální/vertikální tyč, Thopaz/Thopaz+	
N079.1006	Popruh transportní, Thopaz+	
N079.0031	Popruh transportní, Thopaz	
N087.0059	Kabel síťový nabíjecí, Thopaz+	
N077.0148	Kabel síťový nabíjecí, Thopaz/Thopaz+	




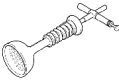

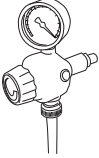
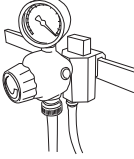
OBJ. ČÍSLO	NÁZEV A POPIS	OBRÁZEK
Příslušenství THOPAZ/THOPAZ+		
N079.0034	Kabel USB, Thopaz/Thopaz+	
N077.0123	Membrána těsnící, Thopaz/Thopaz+ Balení: 10 ks	
N077.1456	Manometr testovací -10 kPa, Thopaz/Thopaz+	
Příslušenství CLARIO / CLARIO TONI		
N074.0001	Set – láhev 0,5l + víčko, Clario / Clario TONI Láhev 0,5 l – neautoklávovatelná Víčko s plovákem proti přesátí – neautoklávovatelná	
N074.0003	Hadice odsávací 5,5/8,5 mm, konektor/FingerTip, Jednorázová, sterilní, 150 cm ,Clario/Clario TONI	
N074.0007	Brašna, Clario / Clario TONI	
N074.0017	Kabel pro připojení na autobaterii, Clario / Clario TONI AC/DC	
N074.0005	Baterie NiMH, Clario / Clario TONI AC/DC	
N074.0002	Komora bezpečnostní, Clario Neautoklávovatelná.	
N014.0030	Komora bezpečnostní, Clario TONI Neautoklávovatelná.	
N074.0008	Ventil k bezpečnosti komoře, Clario / Clario TONI – 1 ks Balení: 10 ks	
N074.0009	Kroužek „O“ těsnící modrý pro spojky přímé, 90° a Clario / Clario TONI – 1 ks Balení: 10 ks	
N074.0010	Plovák proti přesátí k víčku, Clario / Clario TONI – 1 ks Balení: 10 ks	
Příslušenství VARIO		
N077.0105	Adaptér pro láhev PC na Medela vaky, Vario – 1ks Autoklávovatelný Balení: 5 ks	
N077.0821	Držák se šroubem na eurolištu, Vario Držák pro uchycení odsávačky Vario na eurolištu.	
N077.0831	Brašna, Vario	
N077.0832	Kabel pro připojení na autobaterii, Vario AC/DC	

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV A POPIS	OBRÁZEK
Příslušenství VARIO		
N077.1728	Baterie NiMH, Vario AC/DC	
N077.0951	Hadice odsávací 5,5/8,5 mm, kónický konektor/FingerTip, jednorázová, sterilní, 180 cm, Vario	
Láhve		
N077.0082	Láhev 1,5 l polykarbonátová pro jednorázové odsávací Medela Pro vaky 1,5 l	
N077.0085	Láhev 2,5 l polykarbonátová pro jednorázové odsávací Medela Pro vaky 2,5 l	
N077.0125	Láhev 0,25 l, polysulfon. (PS), autoklávovatelná – pojistná	
N077.0155	Láhev 0,5 l, polysulfon. (PS), autoklávovatelná	
N077.0110	Láhev 1l, polysulfonová (PS), autoklávovatelná	
N077.0120	Láhev 2l, polysulfon. (PS), autoklávovatelná	
N077.0130	Láhev 3l, polysulfon. (PS) autoklávovatelná	
N077.0150	Láhev 5l, polysulfon. (PS), autoklávovatelná	
Medela vaky		
N077.0083	Medela vak 1,5 l – 1 ks Min. balení: krabice: 40 ks karton: 120 ks	
N077.0084	Medela vak 1,5 l + ztužovadlo	
N077.0086	Medela vak 2,5 l – 1 ks Min. balení: krabice: 40 ks karton: 120 ks	
N077.0087	Medela vak 2,5 l + ztužovadlo	

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV A POPIS	OBRÁZEK
Víčka		
N077.0420	Víčko velké s kón. spojkou 6–10 mm a pojist. ventilem, autoklávovatelné Pro láhve 1, 2, 3 a 5 litrů.	
N077.0440	Víčko malé s kón. spojkou 6–10 mm a pojist. ventilem, autoklávovatelné Pro láhve 0,25 a 0,5 litrů.	
N077.0450	Víčko malé s kón. spojkou 6–10 mm, pojist. ventilem a úhl. spojkou pro pojist. láhev Autoklávovatelné Pro láhve 0,25 litru.	
Držáky, zásobníky, košíčky		
N077.0521	Držák láhve na eurolištu – plast	
N077.0523	Držák láhve „C“ na přišroubování – plast	
N077.0522	Držák lahve na lůžko univerzální – nerez	
N077.0514	Držák „T“ dvojitý (eurolišta), nerez	
N077.0524	Držák nádstavný - nerez	
N077.0751	Držák odsávací hadice na eurolištu - levý, nerez	
N077.0752	Držák odsávací hadice na eurolištu - pravý, nerez	
N077.0747	Držák síťové šňůry / nožního spínače na eurolištu vozíku odsáv. MEDELA, nerez	
NB011600003	Zásobník katetrů se 2 úchyty na eurolištu, nerez /plast (500 mm)	
N077.0743	Košík k vozíku odsávaček Medela, lakovaný	
Vozíky		
N077.0511	Vozík s eurolištu pro odsávačku MEDELA Vario a centrální sání Pětiramenný, brzděná kolečka	
N077.0741	Vozík s eurolištu pro odsávačky MEDELA Basic a Dominant Flex Kolečka antistatická, 2 brzděná a 2 bez brzdy.	
N077.0742	Vozík s eurolištu pro liposukci dvojitý - pro Dominant Flex a DP 30 2patrový vozík pro umístění odsávačky Dominant Flex a infiltrační pumpy DP 30 / DP 30 LipoPlus. Kolečka antistatická, 2 brzděná a 2 bez brzdy.	

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV A POPIS	OBRÁZEK
Filtry bakteriologické a virové		
N077.0571	Filtr MEDELA kombinovaný proti přesátí/bakteriologický, jednorázový, Vario – bal. 10 ks Bakteriologický filtr chrání pacienta i personál. Ochranný filtr proti přesátí zabraňuje vniknutí odsávaných tekutin do odsávačky.	
N077.0572	Filtr MEDELA bakteriologický, konektor Medela, jednorázový - bal. 10 ks	
N077.0573	Filtr MEDELA bakteriologický, jednorázový – bal. 10 ks Bakteriologický filtr chrání pacienta i personál.	
N077.0575	Filtr MEDELA kombinovaný protipachový uhlíkový/bakteriologický, jednorázový – bal. 10 ks Bakteriologický filtr pohlcující pachy při operačních zákrocích.	
N101035263	VIRUS FILTR MEDELA kombinovaný proti přesátí, jednorázový, konektor Medela – bal. 10 ks	
N101035264	VIRUS FILTR MEDELA kombinovaný proti přesátí, jednorázový, konektor kónický – bal. 10 ks	
N101035265	VIRUS FILTR MEDELA, jednorázový, konektor Medela – bal. 10 ks	
Hadice		
N077.0900	Hadice odsávací silikonová, pr. 7/12 mm, autoklávovatelná –1 m Balení: 25 m	
NB011500003	Hadice odsávací PVC CH25 s 1 konektorem a přeruš. sání FingerTipem, 200 cm, nesterilní –1 ks Balení: 50 ks	
NB011500004	Hadice odsávací PVC CH25 se 2 konektory, 200 cm, nesterilní –1 ks Balení: 50 ks	
NB011500008	Hadice odsávací PVC CH25 s 1 konektorem a volným koncem, 200 cm, sterilní – 1 ks Balení: 50 ks	
NB011500016	Hadice odsávací PVC CH25 se 2 konektory, 300 cm, sterilní – 1 ks	
NB011500017	Hadice odsávací PVC CH25 s 1 konektorem a přerušovačem sání FingerTipem, 250 cm, sterilní – 1 ks	
NB011500013	Hadice odsávací PVC CH30 s 1 konektorem a volným koncem, 250 cm, sterilní – 1 ks Balení: 50 ks	
NB011500015	Hadice odsávací PVC CH30 se 2 konektory, 300 cm, sterilní – 1 ks	

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV A POPIS	OBRÁZEK
Příslušenství ostatní		
N077.1008	Stop ventil, modrý transparentní, sterilní	
N077.0563	Přepínač vakua vč. hadic, spojek a držáku na eurolištu	
N077.0723	Spínač nožní ON/OFF pro el. odsávačky MEDELA	
N077.0095	Konektor vakua pro sériové propojení Medela vaků 1,5 nebo 2,5 l, autoklávatelný, silikonový Pomocí konektoru vakua lze propojit láhve s Medela vaky o objemu 1,5 nebo 2,5 litru do série. Konektor se vsazuje do úchytu láhve.	
N077.0158	Konektor patientský pro sériové propojení Medela vaků 1,5 nebo 2,5 l Jednorázový – 1 ks Pomocí konektoru patientského lze propojit láhve s Medela vaky o objemu 1,5 nebo 2,5 litru	
N077.0542	Konektor pro sériové propojení lahví 1,2,3,5 l, autoklávatelný Pomocí sériového konektoru lze propojit dvě autokláv.láhve do série. Nelze použít k propojení Medela vaků.	
N077.0094	Nádobka pro odběr vzorků na Medela vak, jednorázová – bal. 10 ks Desinfikovatelná, nelze autoklávat	
N077.0562	Nádobka pro odběr vzorků na víčko N077.0420, jednorázová – bal. 10 ks Desinfikovatelná, nelze autoklávat	
N077.1017	Spojka propojovací oboustranná – 1 ks Jednorázová Nelze autoklávat. Vnější průměr spodní: 7 mm Vnější průměr horní: 15 mm Balení: 10 ks	
N077.1018	Spojka propojovací přímá, autoklávatelná – 1 ks Balení: 10 ks	
N077.1019	Spojka propojovací 90°, autoklávatelná – 1 ks Balení: 10 ks	
N077.0100	Spojka úhlová žlutá k 1,5 l Medela vaku – 1 ks Balení: 10 ks	
N077.0101	Spojka úhlová oranžová k 2,5 l Medela vaku – 1 ks Balení: 10 ks	
N077.0102	Spona pojistná k úchytu láhve na Medela vak 1,5 nebo 2,5 l, plast –1 ks Balení: 10 ks	
N077.1013	Klip k víčku – 1 ks Autoklávatelný Balení: 10 ks	
N074.0009	Kroužek „O“ těsnící modrý pro spojky přímé, 90° a Clario / Clario TONI – 1 ks Balení: 10 ks	

OBJ. ČÍSLO	NÁZEV A POPIS	OBRÁZEK
Vakuum extraktory		
K077.0731	Regulátor vakua nožní pro el. odsávačky Medela – vhodný pro vakuum extrakce	
K077.0761	Silc Cup, průměr 50 mm – silikonový zvon pro vakuum extrakci, autoklávovatelný	
K077.0762	Silc Cup, průměr 60 mm – silikonový zvon pro vakuum extrakci, autoklávovatelný	
K077.0078	Silc Cup Trumpet s nerezovým ventilem a držákem, průměr 60 mm Silikonový zvon pro vakuum extrakci, autoklávovatelný	
K077.0080	CaesAid Cup, průměr 60 mm – silikonový zvon pro vakuum extrakci, autoklávovatelný	
REGULÁTORY VAKUA - centrální sání		
N0735138	Regulátor vakua GCE Medievac+ 1000 s rychlospojkou	
N0735148	Regulátor vakua GCE Medievac+ 1000 s držákem na eurolištu, vakuovou hadicí, rychlospojkou	

Osvědčená kvalita

Produkty Medela mají označení CE podle směrnice 93/42/EEC pro lékařské přístroje, splňují mezinárodní průmyslové standardy ISO 9001 a ISO 13485, stejně jako American Good Manufacturing Practice (GMP). Ujistění o dlouhé záruce jsou brány samozřejmost.

Poznámka k MDR

Všechny produkty ZP tř. I jsou certifikovány dle MDR (EU) 2017/745.

Všechny ostatní produkty jsou certifikovány dle MDD 93/42/EEC a mohou být také používány během přechodného období uděleného MDR do května 2024.

Medela bude postupně certifikovat své zdravotnické prostředky podle MDR (EU) 2017/745.

Tato konverze bude dokončena nejpozději do května 2024.

Distributor a servisní středisko:

DN FORMED Brno s.r.o.

Hudcova 76a

612 00 Brno

Telefon: 532 198 888

E-mail: dnformed@dnformed.cz

www.dnformed.cz