




# Ohřivač Miris™

## Suchá lázeň pro ohřev roztoků

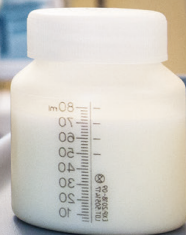

Ohřivač Miris je univerzální přístroj **pro suchý ohřev** i ohřev s vodou. Pro suchý ohřev se používají jako **zdroj tepla speciální korálky** a díky této možnosti se do ohřivaných vzorků nedostane voda, nedochází ke kontaminaci a šetří se energie.

Korálky slouží jako skvělá podpora pro jakoukoli lahvičku nebo injekční stříkačku, kterou potřebujete zahřát bez nutnosti použití speciálních košů nebo držáků. Přístroj lze používat pro kontinuální ohřev. Korálky pro přenos tepla dodávané s ohřivačem mají antibakteriální povlak a snadno se čistí a dekontaminují.

### Obecné vlastnosti:

- Bezspárová vana z nerez oceli
- Polykarbonátové víko
- Objem lázně 5 l
- Topné prvky mimo prostor vany
- Lázeň s možností suchého ohřevu s korálky nebo vodní lázeň
- Digitální displej pro nastavení teploty
- Teplotní ochrana
- Rozsah teploty 5 °C nad teplotu okolí až 95 °C
- Rozsah nastavení 10 až 95 °C po 0,5 °C
- Stabilita teploty  $\pm 0,5$  °C



# Korálky Lab Armor® pro přenos tepla v lázni MIRIS

Tepelné Korálky Lab Armor® jsou suché kovové korálky šetrné k životnímu prostředí a nenáročné na údržbu, které mohou nahradit vodu ve vodních lázních. Korálky jsou neuvěřitelně pohodlné, zůstávají suché a chráněny před mikrobiálními kontaminanty přenášenými vodou.

Korálky na rozdíl od vodní lázně spotřebují méně energie než vodní lázeň. Při teplotě 37°C spotřebuje 2x méně energie než vodní lázeň. Voda se během vodní lázně neustále odpařuje a tím pádem se ochlazuje. Korálková lázeň může být zapnuta kontinuálně, s výjimkou provádění údržby.

## Obecné vlastnosti:

- Kovové korálky
- Nepropouští vlhkost a plyny
- Vysoká tepelná vodivost a retence
- Suchá, mikrobiálně odolná média 80°C až 180°C
- Hladký a zaoblený tvar s vlastnostmi podobnými tekutině

## Produkty Miris

Díky dlouholetým zkušenostem vyvinula společnost Miris portfolio nástrojů a spotřebního materiálu pro kompletní pracovní postup analýzy mateřského mléka s cílem poskytnout co nej přesnější a reprodukovatelné výsledky.



Produkty



Autorizovaný distributor  
a servisní středisko pro ČR:  
DN FORMED Brno s.r.o.

Hudcova 76a, 612 00 Brno  
+420 532 198 888  
www.dnformed.cz  
dnformed@dnformed.cz  
MirisSolutions.cz